
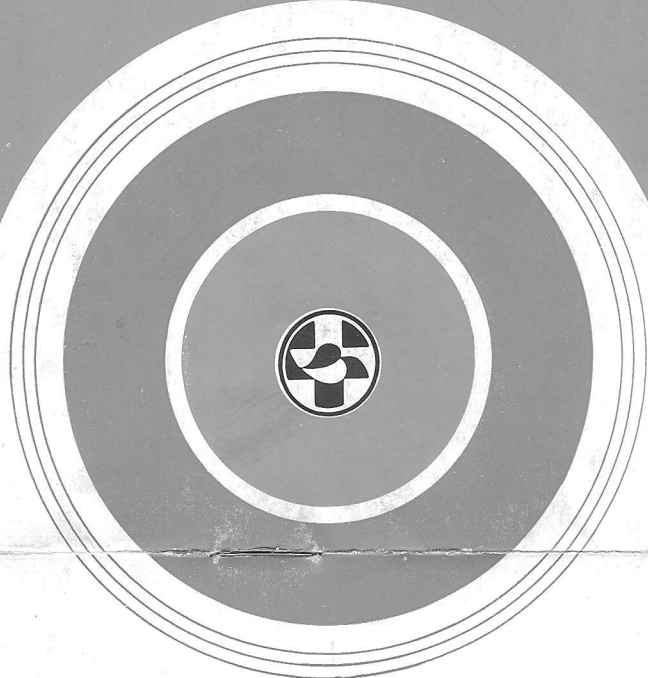


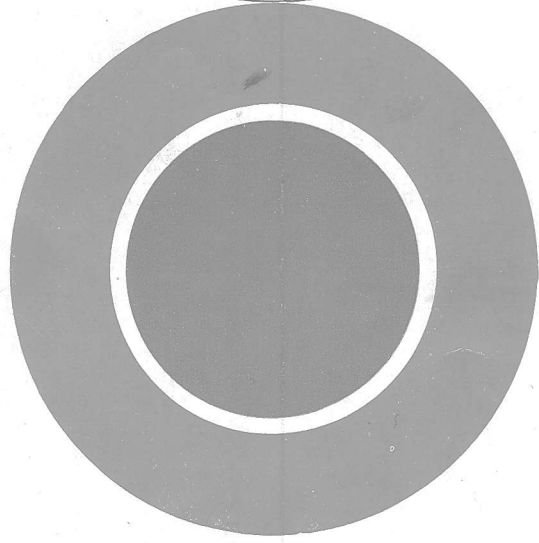


SAHARA²

Chirana

11/82

STOLNÝ INFRAČERVENÝ ŽIARIČ

SAHARA²

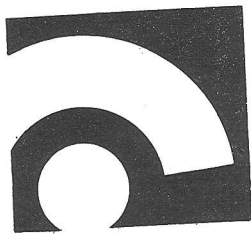

SAHARA²

- Infračervený žiarič možno doporučiť pri týchto chorobách:
- nezápalové degeneratívne ochorenia kĺbov, ktoré vedú k rozpadu chrupavky
 - náhle vzniknuté prudké bolesti v krížoch
 - bolesti svalov z nachladnutia
 - zápaly vedľajších dutín nosových, čelových a čelústnych
 - stavy po extrakcii zubov
 - hnisavé ochorenia kože, t. j. zápal vlasového mieška
 - rôzne hnisavé procesy
 - chronické zápaly prídusiek
 - chronický záduch — astma
 - natiahnutie šľachy
 - bolesti pôvodu nervového

Infračervené žiarenie sa s obľubou využíva v kozmetike, lebo prehráva pokožku, otvára póry, zlepšuje prekrvenie a umožňuje výživným látkam v kréme hlbšie vniknúť do pokožky.

Chorým osobám však vždy doporučujeme pred používaním infračerveného žiarenia poradiť sa s ošetrojúcim lekárom.

Pokyny pre ožarovanie:

Vzdialenosť ožarovaných častí tela volíme podľa príjemného pocitu tepla.

Účinnosť prístroja je najlepšia pri ožarovaní vo vzdialenosti 30 do 50 cm.

Zmenšením vzdialenosti môže sa prekročiť zniesiteľná (tolerancná) dávka žiarenia.

Ožarovanie môže trvať 10—30 minút, pričom sa doporučuje začať najkratšou dobou a čas postupne predlžovať až na 30 minút — 3x denne.

POPIS VÝROBKU

Stolný infračervený žiarič SAHARA 2 je prenosný prístroj so zdro-

jom infračerveného žiarenia vhodných fyzikálnych vlastností pre hlbkové prehrievanie tkaniva.

Podstavec (1) je vyrobený z ocelevej tyče. Na čape podstavca je otáčavo uložené telo infražiarča (2). V tele infražiarča na podložke (6) je upevnená keramická objímka (3). V nej je zaskrutkovaný zdroj infračerveného žiarenia — infražiarovka 250 W (4).

Na vonkajšej strane tela je umiestnený držiak (5), určený na prenášanie, ako i na nastavenie prístroja do pracovnej polohy. Na spodnej časti tela je cez ochrannú návliečku (7) pripojená prírodná šnúra (8) s vypínačom (9). Potrebná poloha pri ožarovaní sa dosiahne pootočením tela infražiarča.

Poloha tela infražiarča je aretovaná oceľovou guľôčkou do príslušných jamiek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	220 V, 50 Hz
Menovitý príkon	250 VA
Žiarivá energia min.	150 mW/cm ² vo vzdialenosti 50 cm
Dĺžka ožarovania	30 min.
Hmotnosť	0,98 kg

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

Infračervený žiarič SAHARA 2

Papierová škatuľa

Návod na obsluhu (je súčasťou STD)


Záručný list na prístroj (je súčasťou STD)

UVEDENIE VÝROBKU DO PREVADZKY

Po vytiahnutí prístroja z papierovej škatule prekontrolujeme, či nie je poškodený a či nie je infražiarovka uvoľnená. Zásunutím zástrčky do elektrickej zásuvky je prístroj pripravený k prevádzke.

Chirana

Chirana

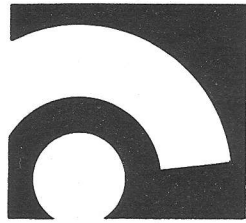

SAHARA₂

OBSLUHA PRÍSTROJA

Po predchádzajúcej kontrole uchopením za podstavec a za držiak otočíte telo infražiaríča do žiadaného smeru žiarenia. Aretáčné zariadenie na čape podstavca zaistí žiaríču požadovanú polohu. Stlačením vypínača na prírodnej šnúre do polohy „I“ sa infražiarovka rozsvieti.

Prístroj umiestnite vo vhodnej vzdialenosti asi 30—50 cm od ožarovaného miesta.

Týmto úkonom je prístroj pripravený na ožarovanie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Prístroj nikdy nenechajte žiarieť vo zvislej polohe — smerom nadol, aby sa nepoškodil a aby nespôsobil požiar.

Prístroj je elektrický spotrebič I. triedy. Možno ho zapojiť iba na elektrovodnú sieť, ktorá vyhovuje ČSN 34 1030 (má nulový vodič). Toto opatrenie je z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a v záujme zabezpečenia funkčnej spoľahlivosti.

ÚDRŽBA A ČISTENIE VÝROBKU

Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu, len bežné zaobchádzanie a čistenie ako všetky ostatné elektrické spotrebiče. S prístrojom však zaobchádzajte opatrne, lebo infražiarovka je zo skla a teda je ľahko rozbitná.

VÝMENA INFRAŽIAROVKY

Ak chceme vymeniť infražiarovku, postupujeme rovnakým spôsobom ako pri výmene bežnej osvetľovacej žiarovky. Odskrutkujeme ju zo závitú otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek (doleva). Infražiarovku zaskrutkujeme opačným postupom. Pred týmto úkonom však musíme prístroj odpojiť od elektrovodnej siete.

Chirana

INFORMÁCIA O OPRÁVARENSKEJ SLUŽBE

Záručné opravy pri dodržaní podmienok záruky, uvedených v záručnom liste, zabezpečuje pre všetkých spotrebiteľov CHIRANA, koncernový podnik Pleštiny, Vrbovská cesta 17.

Opravu po uplynutí záručnej doby zabezpečujú:

Pre mimotřížných spotrebiteľov CHIRANA OTS, koncernová účelová organizácia, Praha 7, Komunardů 36

Pre spotrebiteľov, ktorí si zakúpili výrobok prostredníctvom maloobchodnej siete:

Praha — Stredočeský kraj:

VD Mechanika, závod 101, Plzeňská 22, Praha 5

Juhočeský kraj:

ELEKTROSERVIS České Budějovice, ul. B. Němcové 6

Severočeský kraj:

MECHANIKA Teplice, provozovna Žatec, Bražkova 1730

Východočeský kraj:

Elektrokov OPMP Trutnov, Petříkovická ul.

Západočeský kraj:

Průmyslový podnik města Plzně, Purkyňova 10, Plzeň

Severomoravský kraj:


ETS Ostrava, Bražkova 10

TESKO Frýdek-Místek, Sadova 609

Pre SSR:

OPMP Nové Mesto and Váhom, ul. 1 mája 1351


Chirana

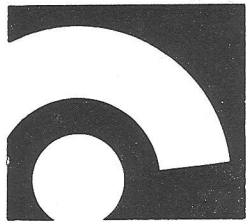

SAHARA₂

- 1 podstavec
- 2 telo infražiarieľa
- 3 keramická objímka
- 4 infražiarovka
- 5 držiak

- 6 podložka
- 7 ochranná návlečka
- 8 privodná šnúra
- 9 vypínač

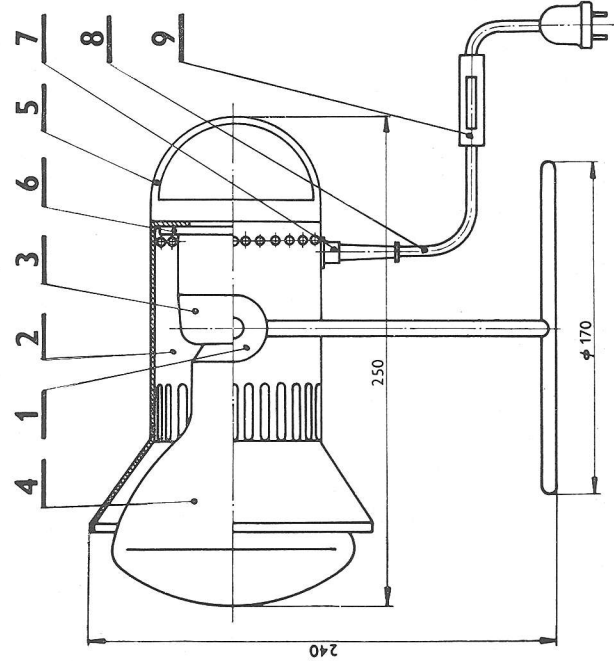

Chirana

SAHARA₂

ZÁRUČNÝ LIST

Názov výrobku: Stolný infračervený žiarieľ SAHARA 2

Odb. číslo: 397 321 536

Výrobné číslo: 14 059

Kontroloval:

Balil:

Dátum predaja:

Pečiatka predajne a podpis predávajúceho:



Podmienky záruky

Výrobca poskytuje na výrobok záruku v zmysle zákona č. 37/71 Zb. a to po dobu 6 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia. V záručnej dobe opraví výrobny podnik CHIRANA, koncernový podnik Piešťany, Vrbovská cesta 17, všetky poruchy za predpokladu, že výrobok:

- a) bol používaný podľa návodu a spôsobom zodpovedajúcim jeho funkcii a poslaniu
- b) nebol poškodený násilím, neodborným alebo nedbalým zaobchádzaním
- c) nebol nadmerne preťažovaný
- d) bol umiestnený, alebo skladovaný na mieste, alebo prostredí popísanom v návode k obsluhu
- e) nebol spotrebiteľom rozmontovaný
- f) na ktorý sa uplatňuje záruka, má riadne vyplnený záručný list ktorého údaje nesmú byť neoprávnene zmenené.