




SAHARA infračervený žiarič

ZAR 6

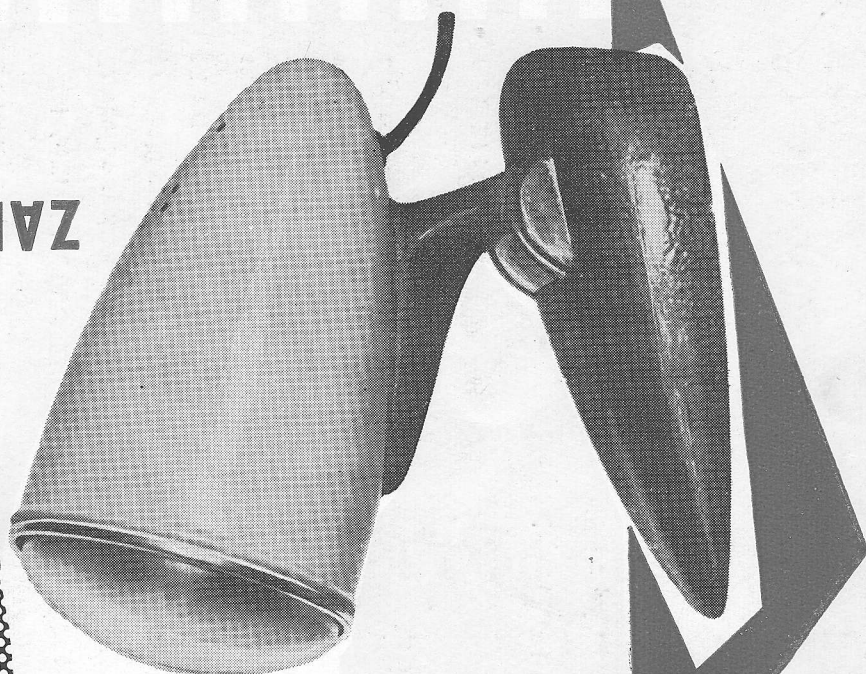

PRESNA MECHANIKA, N. P., STARÁ TURÁ

SAHARA infračervený stolný žiarič ZAR 6

Popis:

Na podstavci v otočnom kĺbe je upevnená nôžka s reflektorom. V reflektore je naskrutkovaná žiarovka infračerveného žiarenia. Na zadnej časti reflektora je pevne pripojený pohyblivý prívod s vypínačom a vidlicou na pripojenie do zásuvky elektrickej siete.

Účinky:

Infražiarič SAHARA 250 W má maximálne žiarenie v oblasti infračerveného spektra o dĺžke vlny 1,3 μ . Lúče o tejto vlnovej dĺžke účinne prenikajú cez pokožku do tkaniva svalov. Ožiarovaním vzniká v rovine žíl a ciev podkapilárnych stav vazodilatačný, ktorý sa postupne zväčšuje, až dôjde k najväčšiemu rozšíreniu arteriol a dajú sa tiež do činnosti všetky miestne kapiláry. Týmto sa uvoľňuje tkanivo svalstva, zmenšujú sa bolesti na ožiarovanom mieste a vypomáha sa prirodzeným obranným a reštauračným silám.

Použitie:

Infražiarič ZAR 6 sa používa len po doporučení lekára, najmä na:

1. Subakutné, chronické a traumatické zápaly, prístupné na ožiarovanie zvonku, svalstvo po presilení, vyklbení a zlomeninách.

2. Rôzne druhy reumatických stavov, neuritíd, neuralgií, ischias lumbago. Infračervené lúče zamedzujú tvoreniu zrastov, hromadeniu krvi v kĺbe a úspešne sa používajú i v gynekológii.

3. Ďalej infračervené lúče spôsobujú dlhšie trvajúce znecitlivenie, a preto sa používajú pri chorobách zubných a kostných, pretože zmierňujú bolesť, najmä po resekciách. Tiež majú vplyv na aktívnejšiu výživu buniek, pomáhajú pri obnove tkaniva, zabraňujú infekciám rán, čím sa potom rany hoja rýchlejšie.

4. Ožiarovať infračerveným žiaričom SAHARA ZAR 6 možno i pred masážou, pasívnym svalovým cvičením galvanickým prúdom, alebo dlhovoľnou terapiou, čím sa zlepši vodivosť pokožky a prehriate tkanivo sa stane poddajné. Predhrievaním dosahuje sa lepšia reakcia na ultrafialové žiarenie horským slnkom.

Iné použitie:

Žiarič SAHARA ZAR 6 dá sa použiť i na vysušovanie vlasov, sušenie ovocia, textilných látok, trvanlivého pečiva a pod.

Upozornenie:

Výrobca ručí za prístroj v dobe a podľa podmienok, ktoré sú uvedené v záručnom liste. Opravy v záručnej dobe robí výrobca, po záručnej dobe Technická služba, nár. pod., Chirana, ktorá je v každom väčšom meste republiky.