

Návod k obsluze

pro tiskárnu

MELAprint[®] 42

Vážený pane doktore:

Velmi Vám děkujeme za důvěru, kterou jste prokázal zakoupením tiskárny MELAprint[®] 42.

Již před 50 lety se firma MELAG specializovala na výrobu zařízení pro sterilizaci pro lékařské účely. Během této doby se firma MELAG — středně velký rodinný podnik a obchodní firma — snažila stát vedoucím výrobcem sterilizačních zařízení. Více než 300,000 zařízení MELAG prodaných na celém světě potvrzuje vynikající kvalitu našich výrobků — ty jsou vyráběny výhradně v Německu.

Před zahájením provozu tiskárny MELAprint[®] 42 si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze.

Zaměstnanci a management firmy MELAG

Obsah

1	Placing the logger into operation	Chyba! Záložka není definována.
1.1	Checking the delivered equipment for completeness	Chyba! Záložka není definována.
1.2	Switching on the power supply	Chyba! Záložka není definována.
1.3	Interface.....	4
1.4	Insertion of the paper roll	Chyba! Záložka není definována.
2	Self testing	Chyba! Záložka není definována.
3	Exchanging the ribbon cartridge	5
4	Accessories and consumables	Chyba! Záložka není definována.

1 Uvedení tiskárny do provozu

1.1 Kontrola dodaného zařízení z hlediska úplnosti


Tiskárna MELAprint®42 je dodána s následujícím příslušenstvím:

- Tiskárna (překontrolujte označení na horní straně tiskárny a zjistěte, zda je identické s označením v dodacím listě)
- 1 ks role papíru
- 1 ks barvicí pásky, již nainstalován
- 1 ks napájecí zdroj pro tiskárnu
- 1 ks návod k obsluze

1.2 Připojení napájecího napětí

Zapojte konektor stejnosměrného napětí z napájecího zdroje do napájecí zásuvky na tiskárně (viz obr.1).
Důležité: Zajistěte správnou polaritu (viz obr.1). Tiskárna MELAprint®42 smí být napájena pouze stejnosměrným napětím 5 V. Doporučený síťový zdroj: MELAG objednáč. č. 01041.


Tiskárna MELAprint®42 je určena pro připojení k následujícím autoklávům MELAG: Vacuklav®24-B, Vacuklav®30-B, Vacuklav®31-B, Euroklav®29V-S, Euroklav®29-S, Euroklav®23V-S a Euroklav®23-S.

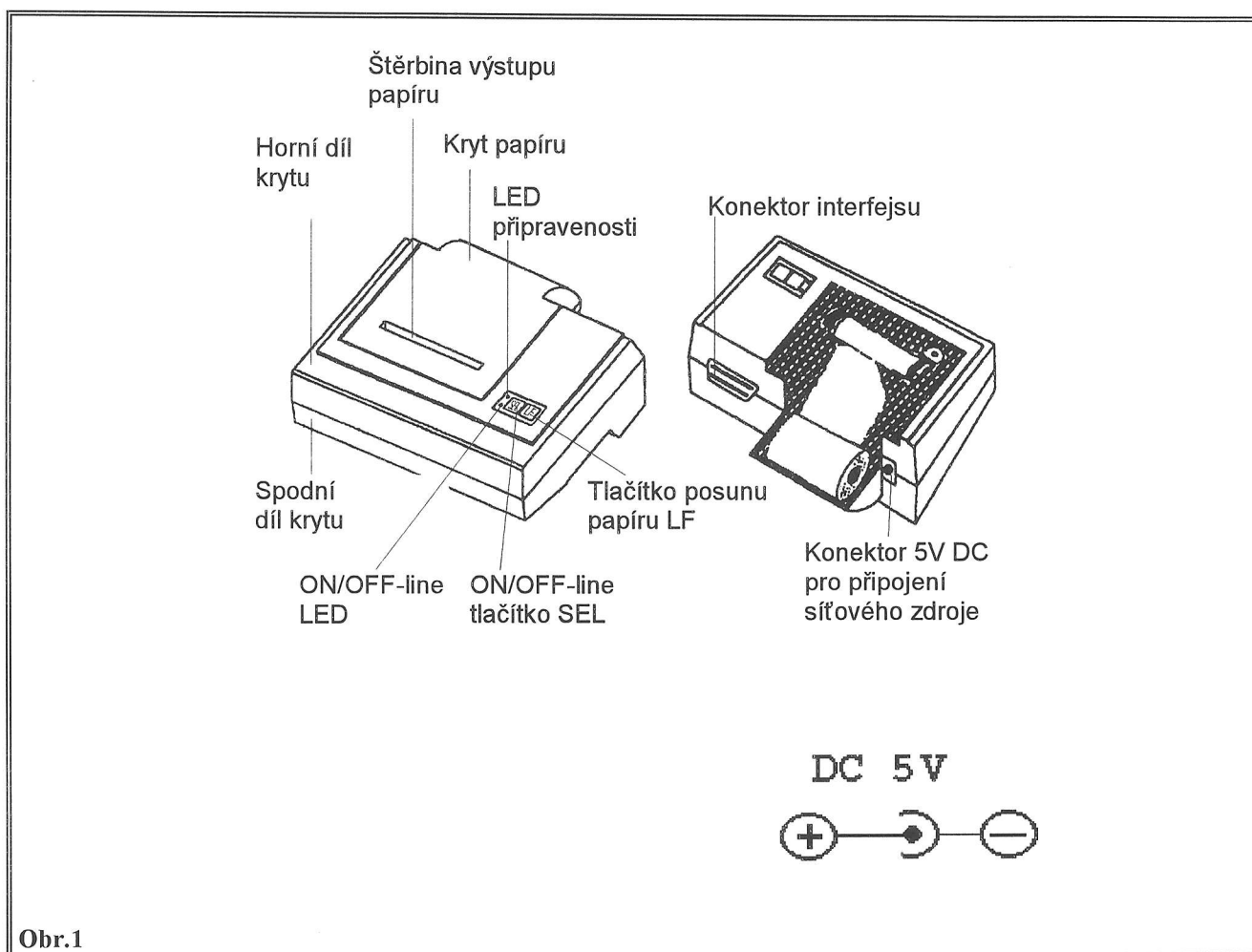

Obr.1

1.3 Interface


Zapojte dodaný kabel pro tiskárnu do interfacového konektoru na tiskárně MELAprint® 42 (viz obr.1).

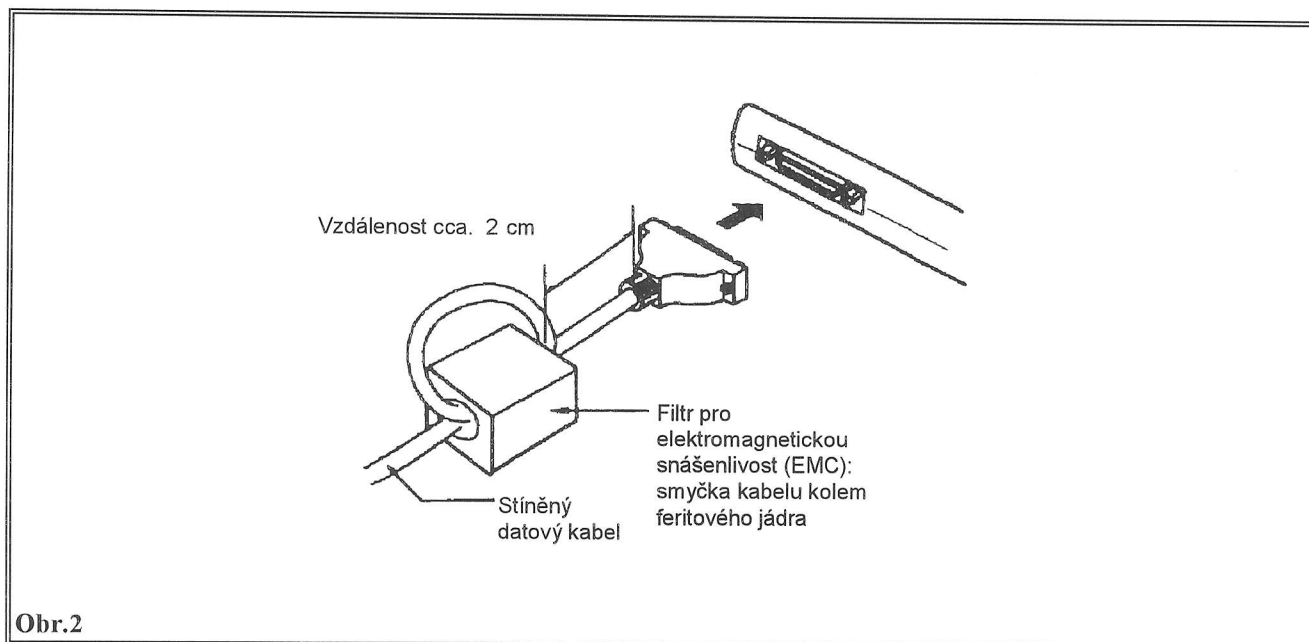

Nainstalujte filtr pro elektromagnetickou snášenlivost (EMC) na stíněný datový kabel (viz obr.2): Nejprve udělejte smyčku na datovém kabelu ve vzdálenosti cca. 2 cm od dlouhého konektoru, jak je znázorněno na obrázku. Potom použijte feritové jádro pro zajištění smyčky.

1.4 Vložení role papíru

1. Posuňte kryt směrem dozadu (viz obr.3).
2. Potom ved'te konec role papíru přes štěrbinu papíru a v tomto okamžiku stiskněte tlačítko LF (Line Feed), až se konec papíru posune tak, že vystoupí z horního krytu (viz obr.4).
3. Zajistěte, aby nedošlo ke zmuchlání papíru mezi krytem a tiskovou hlavou.
4. Nyní prosím vložte roli papíru do držáku role a potom vložte držák zpět.
5. Nyní posuňte kryt papíru zpět do původní pozice. Na závěr zajistěte, aby konec role papíru vystupoval z krytu papíru.

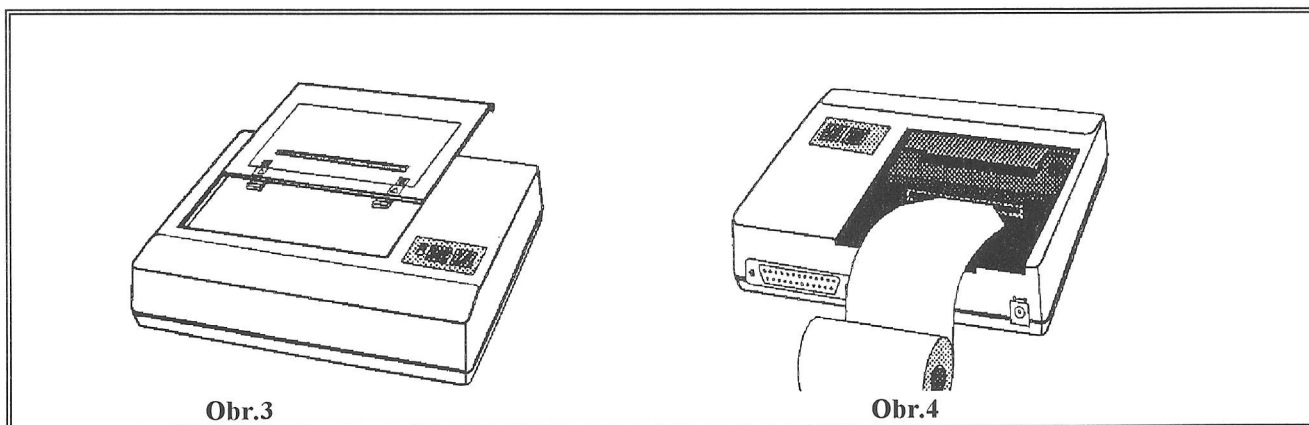

VAROVÁNÍ!

Nikdy netáhněte papír přes tiskový mechanismus. Vždy použijte tlačítko LF pro posun papíru. Pokud budete tahat papír přes tiskový mechanismus, může dojít k jeho poškození.


2 Vlastní test tiskárny

Použijte funkci vlastního testu tiskárny pro zajištění její správné funkce: Stiskněte tlačítko SEL a přidržte je (viz obr.1). Ve stejné době zapněte síťový zdroj (nebo napájecí napětí). Tiskárna vytiskne zprávu o nastavení DIP-přepínačů a o použitých sadách znaků.


3 Výměna kazety barvicí pásky

Po delší době použití se začne u staré tiskové pásky snižovat kvalita tisku. Pro výměnu barvicí pásky postupujte následujícím způsobem:

- Posuňte průhledný kryt ve směru šipky (viz obr.5).
- Vyměňte starou barvicí pásku (obr.6) lehkým zatlačením prstu na značku "PUSH" na kazetě barvicí pásky. Lehký tlak na příslušný bod kazety způsobí, že se zvedne opačná strana a uvolní se z tiskového mechanismu. Potom lze kazetu snadno vyjmout vytažením nahoru z její pozice.

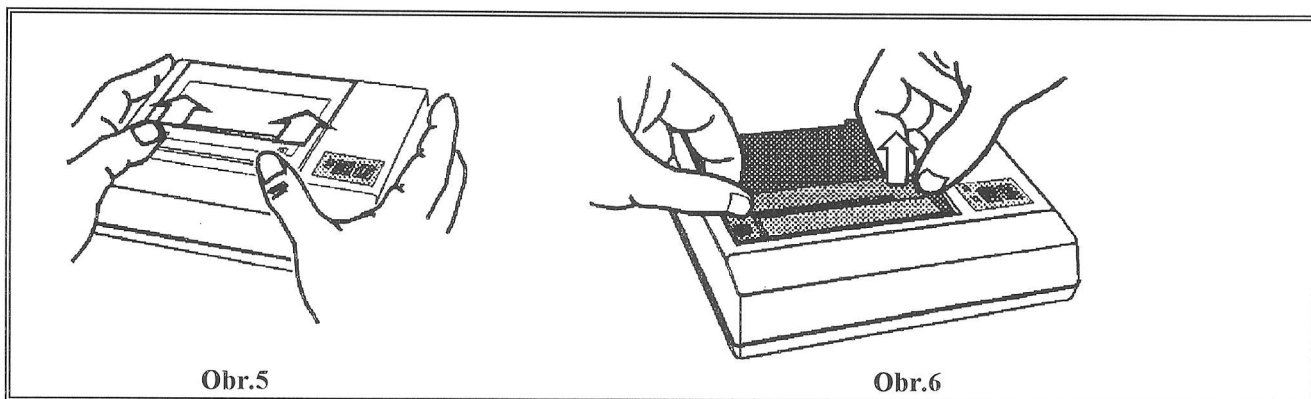

- Vložte novou kazetu barvicí pásky nejprve levou stranou (viz obr.7). Zasuňte kazetu, až zaskočí. Překontrolujte správnou polohu barvicí pásky. V případě potřeby otočte knoflíkem pro posun barvicí pásky ve směru šipky (viz obr.8) pro napnutí barvicí pásky.
- Posuňte průhledný kryt tak, až zaskočí do své pozice (viz obr.3).
- Vyměňte roli papíru, jak je popsáno v kapitole 1.4.

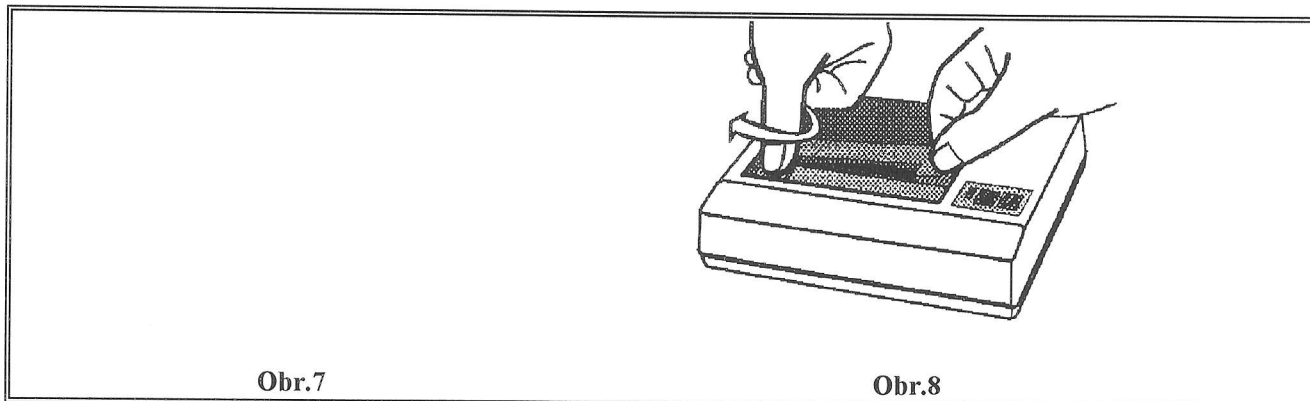

4 Příslušenství a spotřební materiál

Spojte se se specializovanými prodejci firmy MELAG pokud požadujete objednání příslušenství a spotřebního materiálu.

Při objednávkách spotřebního materiálu uveďte prosím sériové číslo tiskárny a ve vaší objednávce použijte objednací čísla MELAG uvedená v tabulce.

Objednací č.:	Popis
41545	Papír pro tiskárnu (5 rolí)
41940	Kazeta barvicí pásky