

Fresenius Medical Care

Bezpečnostně technická kontrola přístroje Module DPS

(podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou plně nabijte (16 hodin) akumulátor přístroje

typ:

výrobní číslo: 17855622

inv. č. 19630

umístění přístroje:

OK

- | | | | |
|----|--|-------|--|
| 1. | Zobrazení ubíhajícího času mezi dvěma BTK (tEST1) | H/J/M | ☒ |
| 2. | Datum poslední údržby (tEST1) | J/M/A | ☒ |
| 3. | Celkový čas na displeji (tEST6) | H/J/M | ☒ |
| 4. | Kontrola LED (tEST2) | | ☒ |
| 5. | Kontrola tlačítek klávesnice (tEST3
(viz. Technický manuál, kapitola 3) | | ☒ |
| 6. | Kontrola čidla tlaku (tEST9)
Překontroluj, zda zobrazená hodnota je mezi 0 a 100g (nezatížené čidlo).
Stiskni a uvolni čidlo, zobrazená hodnota musí být mezi 0 a 100g
Pokud ne, viz. kalibrační mód EtAL9. | | ☒
☒ |
| 7. | Kontrola ADC převodníku (tESTb)
vstup 3
hodnota mezi $066 \leq \dots \text{LSB} \leq 08F$
zobrazená hodnota-amplituda výstupu (0,6 V + 0,05)
pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL9 | | ☒ |
| 8. | Kontrola čidla polohy (tEST C)

použij kalibr T300775-B nebo T300940E a T300775G
horní poloha $114,5 \leq \dots \text{mm} \leq 115,5$
spodní poloha $19,5 \leq \dots \text{mm} \leq 20,5$

pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL6 | | ☒
☒ |
| 9. | Kontrola držáku stříkačky (tESTF) pro stříkačku používanou na zařízení, ověř zobrazený
typ stříkačky použitím ověřovací pomůcky (VG3: T301453).
Pozn.: VG3 znamená: (V) ověřovací pomůcka, (G3) skupina stříkaček č.:3 | | ☒ |

držák stříkačky v horní poloze	zobrazeno: _____	OK ☒
nástroj č.1: Max	zobrazeno: 50 ccm	☒
nástroj č.1: Mini	zobrazeno: 50 ccm	☒
nástroj č.2: Max	zobrazeno: 20 ccm	☒
nástroj č.2: Mini	zobrazeno: 20 ccm	☒
nástroj č.3: Max	zobrazeno: 10 ccm	☒
nástroj č.3: Mini	zobrazeno: 10 ccm	☒
nástroj č.4: Max	zobrazeno: 5 ccm	☒
nástroj č.4: Mini	zobrazeno: 5 ccm	☒
držák stříkačky ve spodní poloze:	zobrazeno: _____	☒

Zobrazená velikost stříkačky má odpovídat použité pomůcce, pokud ne viz „EtAL d“

Kalibraci velikosti stříkačky provádět pomůckami číslo 5, 6 a 7. (CG3: T301452)

Pozn.: CG3 znamená: (C) kalibrační pomůcka, (G3) skupina stříkaček č.:3

Pokud je přístroj v kalibračním módu (EtALd), postupuj takto:

Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 5 cc, vlož pomůcku č.:7, průměr Mini.

Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 10 ccL/5 ccH, vlož pomůcku č.:7, průměr Max

Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 20 ccL/10 ccH, vlož pomůcku č.:6, průměr Mini

Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 20 ccH, vlož pomůcku č.:6, průměr Max

Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 50 ccL, vlož pomůcku č.:5, průměr Mini

Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 50 ccH, vlož pomůcku č.:5, průměr Max

Stiskni tlačítko confirm, pumpa se nastaví do kalibračního módu (EtAL d).

Po kalibraci proveďte ověření (tEStF) velikostí stříkaček.

- | | | |
|-----|---|---|
| 10. | Kontrola seznamu stříkaček v paměti a na panelu přístroje (tEStH) | ☒ |
| 11. | Funkční kontrola
kontrola vnějších krytů a stavu síťové šňůry | ☒ |
| 12. | Kontrola antisifonu
kontrola funkce antisifonu (volnost pohybu, bez nepřípustné vůle)
kontrola alarmu pro horní a spodní polohu
kontrola NO alarm při přítomnosti pomůcek T301454 nebo T301455 | ☒
☒
☒ |
| 13. | Kontrola zpětného tlaku (s novou stříkačkou BD Plastipack 50 ccm) při 120 ml/h.
Volba alarmu střední hladiny okluze
nebo proměnný mód $0,55 < \dots \dots \dots \text{bar} \leq 0,75$
nebo 500 +/- 75 mm Hg $\dots \dots \dots \text{mm Hg}$
pozn.: spusťte test při zpětném tlaku=0, aby zařízení mohlo inicializovat
tlakový senzor při startu infuze | ☒
☒ |
| 14. | Kontrola prealarmu a konce infuze
Rychlost podávání 50 ml/h – BD 50 ccm
Optický a akustický alarm 5 min. +10 s před alarmem konec infuze | ☒ |
| 15. | Kontrola alarmu na konci infuze (BD Plastipack 50 ccm)
přečíst hodnotu polohy pístu (tEStC) $18,5 \leq \dots \dots \dots \text{mm} \leq 19,5$
pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL6 | ☒ |
| 16. | Kontrola linearity (BD Plastipack 50 ccm) – rychlost 50 ml/hod
kontrola polohy pístu $50\text{ml} < X < 60\text{ml}$ X1 $\dots \dots \dots \text{mm}$ | ☒ |

OK

rozdíl X1-X2leží mezi

74,96 ≤75,44..... ≤ 76,47



17. Kontrola zámku



připojit Module na Base

připojit Base k napájení

stisknout ON na Module

kontrola, zda je č. Module zobrazeno na Base a na Module

kontrola, zda zobrazené číslo souhlasí s polohou Module na Base

pomalou odpojit Module

kontrola, že se rozsvítí kontrolka „C“

Pokud se objeví nějaká anomálie, postupujte podle „adjusting ILS“ v TM

18. Kontrola akumulátoru

nabijte dostatečně akumulátor



test při rychlosti podávání 40 ml/h



Pokud je autonomie menší než 3 hod., vyměň akumulátor.

Pozn: akumulátor může ztratit 25 až 50 % své kapacity deklarované výrobcem kvůli svým chemickým článkům z důvodu stárí nebo nepřítomností nabíjecích a vybíjecích cyklů.

19. Test elektrické bezpečnosti

- neutrální vodič a kovový plášť



- fáze a kovový plášť



Poznámky:

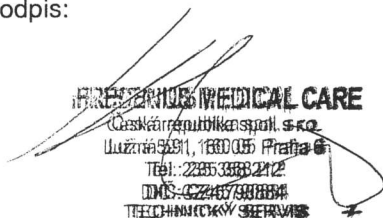
Zdravotnický prostředek je ☒ není ☐
funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 12. 7. 2008

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

datum: 12. 7. 2008

podpis:


PRESTIUM MEDICAL CARE
Česká republika spol. s r.o.
Luzná 5591, 160 05 Praha 6
Tel.: 2265 356 212
DMS: 0226798888
TECHNICKÝ SERVIS

editest v.č. 200215
IMED v.č. 10951103
Multimetr v.č. 122264ABH