



Údaje pacienta

Pohlaví:		Preneseno z:		Zaháj. chirurg. zákroku:	
Záhlaví:		Jméno za svobodna:		Konec chirurg. zákroku:	

Telesný stav

Výška (cm):		Plocha povrchu tela (BSA) (m ²):		Krevní skupina:	
Hmotnost (kg):		Vypočtený průtok (l/min):		Index průtoku (l/min/m ²):	
Rizikové skóre:		NYHA:		EF (ejekční frakce) (%):	
Chirurgický přístup:		Urgentnost:			

Klinické údaje

Postupy:	Diagnózy:	Rizika:
Alergie:	Infekce:	
Premedikace:	Studie:	

Chirurgický tým

Perfusiolog		Kardiolog		Instrumentárka	
Chirurg		Anesteziolog		Stážista chirurgie	
Asistent		Anesteziologická sestra			

Souprava nástroju

HLM:	
Arteriální cepadlo:	
Zar. pro ohrev a chlazení:	
Autotransfúze:	
BGA online:	
BGA offline:	
Monitor pacienta:	
ACT:	
Monitor plynu:	
Mozkový oxymetr:	

Jednorázové mat.

Typ	Identifikace	Referenční číslo	Císlo šarže	Výrobní číslo	Třetí strana	Datum expirace
Souprava hadicek						
Oxygenátor						
Rezervoár						
Filtr před bypassem						
Hemokoncentrátor						
Kardioplegický výměník tepla						
Arteriální filtr						
Kardiotomie						



Jednorázové mat.

Typ	Identifikace	Referenční číslo	Císlo šarže	Výrobní číslo	Třetí strana	Datum expirace
Odstředivé cernadlo						
Autotransfuzní souprava						
Kardioplegická souprava						
Kolapsibilní venózní rezervoár						

Prírústek/Ztráty

Plnění:	
Vstup:	
Celkem vstup:	
Celkem výstup:	
Prírústek/Ztráty:	

Celkem

Hodnoty kardioplegie	ml
----------------------	----



Kontrolní seznamy

Check list

Stav	Název	Stav	Název
Nic nekontrolováno	Pacient - identifikován	Nic nekontrolováno	- dokumentace prostudována
Nic nekontrolováno	Přístroj pro mimotelní obeh - správná zásuvka	Nic nekontrolováno	- moduly funkční
Nic nekontrolováno	- smer otáčení správný	Nic nekontrolováno	Medicínální plyny - připojeny do centrálního rozvodu
Nic nekontrolováno	- otevreny přívody	Nic nekontrolováno	- prtok plynu správný
Nic nekontrolováno	Sterilita - obaly neporušeny	Nic nekontrolováno	- expirace v pořádku
Nic nekontrolováno	Vymeník tepla - funguje	Nic nekontrolováno	- doplnená voda
Nic nekontrolováno	- připojení hadic k oxygenátoru správné	Nic nekontrolováno	- vymeník tepla testován
Nic nekontrolováno	- kontrola hadic pri off pump prováděna	Nic nekontrolováno	Vyhrívací podložka - prtok tekutiny volný
Nic nekontrolováno	- pred použitím dodrženy pokyny výrobce	Nic nekontrolováno	- vizuální kontrola podložky - bez závad
Nic nekontrolováno	Oxygenátor - plyny připojeny	Nic nekontrolováno	- výstupy plynu volné
Nic nekontrolováno	- vymeník tepla testován	Nic nekontrolováno	Hadicový set - všechny hadice připojeny
Nic nekontrolováno	- kouhoty zkontrolovány	Nic nekontrolováno	- sání ve správném smeru
Nic nekontrolováno	- chlopne ve správném smeru	Nic nekontrolováno	- kontrola složeného setu
Nic nekontrolováno	SCP - správné zapojení, sestavení	Nic nekontrolováno	- baterie dobity
Nic nekontrolováno	- připraven záložní zdroj na OS	Nic nekontrolováno	- zpetná chlopn správně zapojena
Nic nekontrolováno	- flow metr správně připojen	Nic nekontrolováno	Odvzdušnění a okluze - okluze správně nastavena
Nic nekontrolováno	- odvzdušneny hadice, oxygenátor, filtr	Nic nekontrolováno	- odvzdušnena kardioplegie
Nic nekontrolováno	- recirkulace uzavřena	Nic nekontrolováno	Monitorace - teploměry připojeny (arteriální, venosní, kardioplegie)
Nic nekontrolováno	- tlakoměry funkční, připojeny	Nic nekontrolováno	- senzory zapojeny a kalibrovány
Nic nekontrolováno	Bezpečnostní zařízení a alarmy	Nic nekontrolováno	- alarmy nastaveny (tlak, teplota)
Nic nekontrolováno	- detektor bublin připojen a spuštěn	Nic nekontrolováno	- hladinový hlídac připojen a spuštěn
Nic nekontrolováno	- pohotovostní pohonná jednotka připravena	Nic nekontrolováno	Antikoagulace - Heparin podán
Nic nekontrolováno	- ACT dostatečné pro spuštění ECC	Nic nekontrolováno	Doplňky připraveny - klemy, kliky, léky, roztoky
Nic nekontrolováno	- hemokoncentrátor	Nic nekontrolováno	- autotransfuzní vak

kontroloval:

dle:



Fakultní nemocnice Olomouc
Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Zdravotníku 248/7
Olomouc, 77900


Datum chir. zákr.:

C. ECC:

Číslo případu:

C. přijetí:

Operací sál:

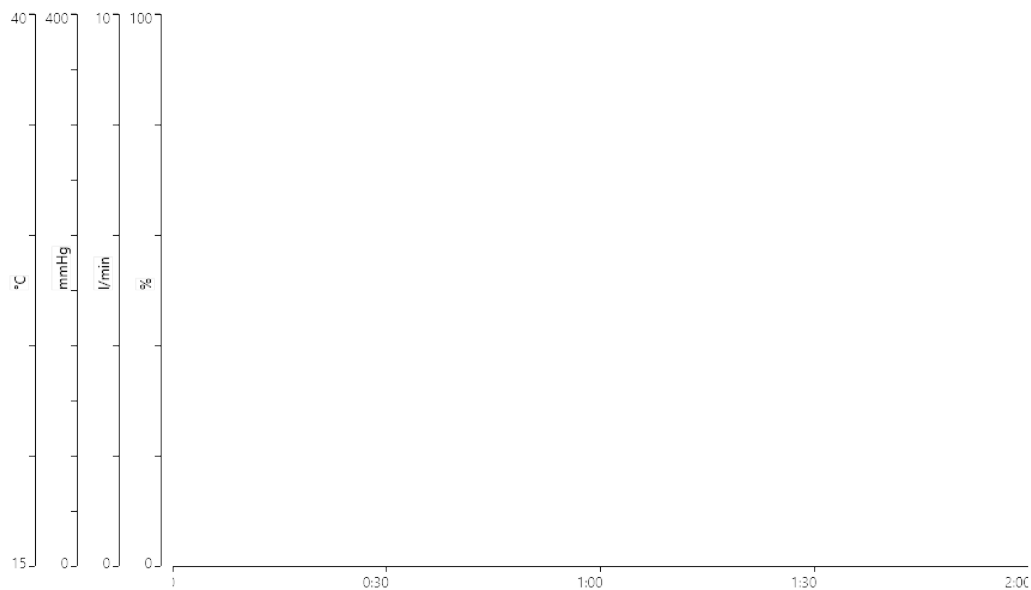

Temp1 ext.
°C
Pressure1
mmHg
ArtFlow
l/min
MAP
mmHg
SatO2Ven
%