


Pokyny pro odběr tkáně pupečnicku

Odběr tkáně pupečnicku proveďte co nejdříve po odběru pupečnickové/pupečnickové a placentární krve!

Upozornění:

Odběrová nádoba i svorky jsou doručeny ve sterilním obalu. Odběrovou nádobu nebo svorky nepoužívejte v případě, pokud je ochranné sterilní balení nebo odběrová nádoba či svorky viditelně poškozené. Před použitím proveďte vnější obal, zda není poškozen a zda je víčko odběrové nádoby uzavřené.

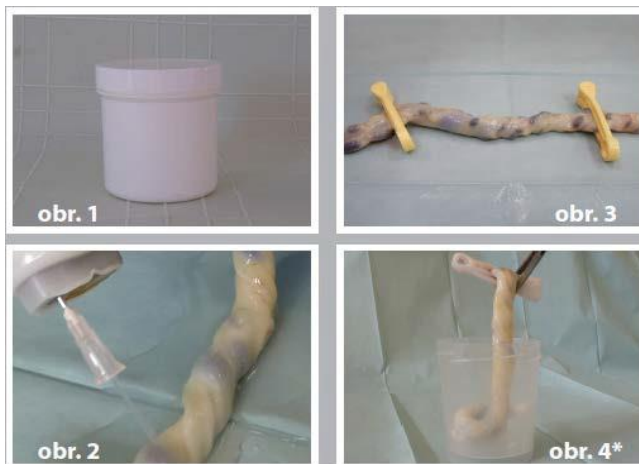

Postup před odběrem tkáně pupečnicku:

1. Sejmete samolepku s číslem šarže a datem expirace z levé části papírového sáčku s odběrovou nádobou a nalepte jej na odběrovou nádobu (obr. 1).
2. Odběrovou nádobu označte **samolepícím štítkem nemocnice s identifikačními údaji**: jméno rodičky, rodné číslo/ datum narození a **samolepícím štítkem CBC CZ** s informací: „AUTOLOGNÍ ODBER“, „NEMRAZIT!“, kde doplňte datum a čas odběru; a **samolepícím štítkem se SEC kódem**.
3. K odběru vyberte takový úsek pupeční šňůry, který je:
 - dostatečně vzdálený od místa vpichu po odběru pupečnickové krve,
 - pokud možno nejrovnější,
 - obsahuje nejméně zbytkové krve na vnitřní i vnější straně.
4. Důkladně opláchnete asi 15 cm tkáně pupečnicku přiloženým sterilním fyziologickým roztokem a důkladně dezinfikujte nejodovým dezinfekčním roztokem na sliznice (obr. 2). Ze vzdálenosti cca 10 cm postříkejte omytou pupeční šňůru po celé její délce a optimálně i všemi směry. Před odběrem nechte dezinfekci několik sekund působit podle návodu!
5. Omytou a dezinfikovanou pupeční šňůru položte na sterilní roušku. Nyní je vše připraveno k odběru.

Postup odběru tkáně pupečnicku:

1. Opláchnutý a vydezinfikovaný segment pupeční šňůry zasvorkujte na obou koncích přiloženými svorkami tak, aby jeho délka mezi svorkami byla cca 10 cm. Vystříhnete zasvorkovanou část tkáně z vnější strany svorek tak, aby délka tkáně za svorkami byla nanejvýš 1 cm (obr. 3).
2. Vystříhnutý segment pupečnicku ještě jednou opláchnete fyziologickým roztokem pro odstranění zbytku krve, vydezinfikujte a nechte dezinfekci několik sekund působit.
3. Otevřete odběrovou nádobu, opatrně sterilní pinzetou vložte tkáň pupečnicku (i se svorkami) do nádoby (obr. 4). Tkáň v odběrové nádobě vždy zalijte fyziologickým roztokem tak, aby byla celá ponořená. Nádobu pečlivě uzavřete a vložte do ZIP sáčku s absorpční vložkou.

Postup po odběru tkáně pupečnicku:

1. Odeberte venózní krev rodičky do obou přiložených a předem označených zkumavek.
2. Do příjezdu pracovníka odpovědného za transport uchovávejte odebranou tkáň společně s odebranou pupečnickovou / pupečnickovou a placentární krví a zkumavkami venózní krve rodičky při teplotě +2 až +8 °C! V žádném případě NEMRAZTE!!!
3. Při vyplnění Průvodního listu nezapomeňte zaškrtnout políčko „tkáň pupečnicku“ v horní části průvodního listu. Kopii Průvodního listu spolu s vyplněným a podepsaným Informovaným souhlasem a Evidenčním listem odběrové sady a transportního boxu založte do dokumentace na oddělení a archivujte dle archivačního řádu Vašeho oddělení.
4. Neprodleně po odběru informujte pracovníka CBC CZ na bezplatné lince 800 900 139. Tato linka je v provozu ve všední dny, o víkendech i státních svátcích. Při nahlášení uveďte své jméno, nemocnici, typ odběru, jméno rodičky a datum a čas odběru.
5. Po příjezdu pracovníka odpovědného za transport vložte do přepravního boxu k odebrané pupečnickové/ placentární krvi zazipovaný sáček s tkání pupečnicku, 2 ks zkumavek s venózní krví rodičky, 2 ks nachlazených chladících vložek, originál Průvodního listu pro autologní odběr a případně další související dokumentaci.