

Martin Bičíš - BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové

DIČ: CZ6404282192, IČO: 15591051, číslo účtu: 21397/0300

tel. 495 217 192

fax. 495 213 213

Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: monitor Medtronic 2090 Vitatron II b	Výrobní číslo : PKK100126R Invent. číslo: C005926-000 ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: I.interní klinika -ambulance
---	--	---

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			ANO
Klávesnice-folie/ovládací prvky			ANO
Síťová zásuvka a kabel			ANO
Baterie /akum./-záložní zdroj			x
Vizualní kontrola příslušenství		ekg,sonda	ANO
			-
Dokumentace			-

Funkční zkouška

Průběh testu			ANO
Zvukový - optický signál			ANO
Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy			ANO
Kontrola snímačů,kabelů		INR010126R	ANO
Kontrola monitoru			ANO
Signalizace displeje,indik.prvků			ANO
Kontrola svodů-funkčnost ekg			ANO
Nastavovací prvky - čitelnost			ANO
Typ sensoru-příslušenství			ANO
Tisk			ANO

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. 230 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : 0,18 Ω	Unikající proud : /PE 0,54 mA
----------------------	---	----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu: **ANO**

Pokud NE - důvod:

Použité přístroje:

REVEX R2051 v.č. 0401174 a RM 2050 v.č. 4030008 přístroj ke kontrole elektr. spotřeb. - kalibrační list č. R2051/1307 a RM2050/044/M

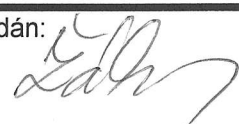
Simulátor SpO2 Fluke, v.č. 9106040

Manometr CRESSTO DMU-R1000 v.č.2842/06 - Snímač byl porovnán s měřidlem CRESSTO s.r.o., ev.č. P262,
návaznost na etalon ČMI zajištěna prostřednictvím AKL ČEZ Dukovany(C245)

Simulátor EKG Sim1, v.č. 0430029

Digiální teploměr TESTO - kalibrační list č. 350-07

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly: 7. 2009	Kontrolu provedl: V.Kužel Datum : 24.7.2008 Podpis :  MARTIN BIČIŠ - BIČELS servis Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ tel. 495 217 192, fax 495 217 191	Přístroj předán:  Datum: Podpis :
--	--	--

