

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník	FN Olomouc	Int.kl. ENDO
Přístroj	Elektrokoagulace	
Typ	Force GSU	
Výrobní číslo	G3F899C	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce

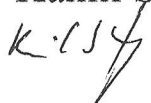
Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče		0,18 Ω	max. 0,2 Ω
Izolační odpor		>20 M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,18 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,000 mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Kamil Slaný
Podpis: 

Provedeno dne: 20.8.2008
Datum příští kontroly: 2/2009



QA TEST FORCE GSU

OBJEDNÁVKA: DIS 0801147 SN: G3F899C
TESTOVAL: KS DATUM: 20.8.2008

4.0 PRE-TEST CHECK ☒
5.0 TEST PO ZAPNUTÍ ☒
7.0 FUNKČNÍ TEST ☒
KONTROLA NÁLEPEK ☒

8.0 MOD NÍZKÝCH PRŮTOKŮ

NASTAVENÝ PRŮTOK [LPM]	MĚŘENÝ PRŮTOK [LPM]
1,0	$0,10 \leq 0,61 \leq 0,90$
5,0	$1,70 \leq 2,1 \leq 2,50$
10,0	$3,60 \leq 4,2 \leq 4,40$

STANDARDNÍ MOD

NASTAVENÝ PRŮTOK [LPM]	MĚŘENÝ PRŮTOK [LPM]
1,0	$0,40 \leq 2,4 \leq 3,60$
5,0	$6,60 \leq 9,2 \leq 9,80$
10,0	$14,4 \leq 17,1 \leq 17,6$

10.0 Alarmový tlak po ucpání $27 \pm 2,5$ psig ☒

11.0 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

$R_p = 0,18 \Omega$
 $R_i > 20 M\Omega$
 $I_{un} = 0,18$ mA
 $I_{unp} = 0,000$ mA

12.0 Automatické přepínání lahví ☐

TECHNIK: Kamil Slaný

DATUM PŘÍŠTÍ KONTROLY: 2/2009

PODPIS:

