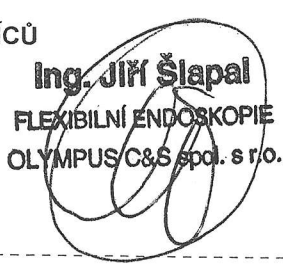


ZÁKAZNÍK: Fakultní nemocnice Olomouc I. chir. klinika - endoskopie I.P.Pavlova 6 775 20 <u>Olomouc</u> DIČ: 379-00098892		PŘÍSTROJ: PVM14N2E Monitor ☒ zdravotnický dg.th. ☒ elektrický		VÝROBNÍ ČÍSLO: 6001166	DAT.PRODEJE: . -																																																															
KONTROLA ☒ Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 Sb.		☐ Po opravě		☐ Revize																																																																
ZKOUŠENO DLE ČSN EN ☐ předpis Olympus		☒ 60 601 - 1		☐ 61010																																																																
POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE ☒ SECUTEST		☐ SURGICASE 20		☐ EPM 3																																																																
A) VIZUÁLNÍ KONTROLA ☒ vyhověl ☐ nevyhověl (kryty, větrací otvory, držadla, ovládací a kontrolní prvky, přívody, vidlice, nádoby na kapalinu, propojovací prvky, příslušenství ...)																																																																				
B) FUNKČNÍ ZKOUŠKA DLE PŘEDPISU OLYMPUS ☒ vyhověl ☐ nevyhověl																																																																				
C) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ 14.05.08 14:47 olympus.cz Zakaznik: FN chir endo Olomouc Přístroj: pvm14n2e Uvratitel: OLYMPUS Typ: monitor Uvr.cislo: 6001166 Oprava: revize Spotřebice: na zásuvce Tr.I / BF <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mer. hodnoty</th> <th>Mez. hodnoty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>RSL</td><td>0.108Ω</td><td><0.200Ω</td></tr> <tr><td>RISO</td><td>05.06MΩ</td><td>>2.000MΩ</td></tr> <tr><td>UISO</td><td>052WU</td><td>0500U</td></tr> <tr><td>AI</td><td>0.233mA</td><td><03.50mA</td></tr> <tr><td>ULH</td><td>245.6V</td><td>253.0V</td></tr> <tr><td>IEA.NC</td><td>0.221mA</td><td><0.500mA</td></tr> <tr><td>IEA.SF</td><td>0.439mA</td><td><1.000mA</td></tr> <tr><td>IUX.NC</td><td>001.0pA</td><td><100.0pA</td></tr> <tr><td>IUX.SF</td><td>001.0pA</td><td><0.500mA</td></tr> <tr><td colspan="3">Un.proud pacientem</td></tr> <tr><td>Ist.NC</td><td>001.0pA</td><td><0.100mA</td></tr> <tr><td>Ist.SF</td><td>001.5pA</td><td><0.500mA</td></tr> <tr><td>Iss.NC</td><td>001.1pA</td><td><10.00pA</td></tr> <tr><td>Iss.SF</td><td>001.0pA</td><td><050.0pA</td></tr> <tr><td>LUP</td><td>001.6pA</td><td><05.00mA</td></tr> <tr><td colspan="3">Pom.proud pacientem</td></tr> <tr><td>Ist.NC</td><td>001.0pA</td><td><0.100mA</td></tr> <tr><td>Ist.SF</td><td>001.0pA</td><td><0.500mA</td></tr> <tr><td>Iss.NC</td><td>001.0pA</td><td><10.00pA</td></tr> <tr><td>Iss.SF</td><td>001.0pA</td><td><050.0pA</td></tr> </tbody> </table>							Mer. hodnoty	Mez. hodnoty	RSL	0.108Ω	<0.200Ω	RISO	05.06MΩ	>2.000MΩ	UISO	052WU	0500U	AI	0.233mA	<03.50mA	ULH	245.6V	253.0V	IEA.NC	0.221mA	<0.500mA	IEA.SF	0.439mA	<1.000mA	IUX.NC	001.0pA	<100.0pA	IUX.SF	001.0pA	<0.500mA	Un.proud pacientem			Ist.NC	001.0pA	<0.100mA	Ist.SF	001.5pA	<0.500mA	Iss.NC	001.1pA	<10.00pA	Iss.SF	001.0pA	<050.0pA	LUP	001.6pA	<05.00mA	Pom.proud pacientem			Ist.NC	001.0pA	<0.100mA	Ist.SF	001.0pA	<0.500mA	Iss.NC	001.0pA	<10.00pA	Iss.SF	001.0pA	<050.0pA
	Mer. hodnoty	Mez. hodnoty																																																																		
RSL	0.108Ω	<0.200Ω																																																																		
RISO	05.06MΩ	>2.000MΩ																																																																		
UISO	052WU	0500U																																																																		
AI	0.233mA	<03.50mA																																																																		
ULH	245.6V	253.0V																																																																		
IEA.NC	0.221mA	<0.500mA																																																																		
IEA.SF	0.439mA	<1.000mA																																																																		
IUX.NC	001.0pA	<100.0pA																																																																		
IUX.SF	001.0pA	<0.500mA																																																																		
Un.proud pacientem																																																																				
Ist.NC	001.0pA	<0.100mA																																																																		
Ist.SF	001.5pA	<0.500mA																																																																		
Iss.NC	001.1pA	<10.00pA																																																																		
Iss.SF	001.0pA	<050.0pA																																																																		
LUP	001.6pA	<05.00mA																																																																		
Pom.proud pacientem																																																																				
Ist.NC	001.0pA	<0.100mA																																																																		
Ist.SF	001.0pA	<0.500mA																																																																		
Iss.NC	001.0pA	<10.00pA																																																																		
Iss.SF	001.0pA	<050.0pA																																																																		
ZÁVĚR KONTROLY VÝROBEK KONTROLE ☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU ☐ NEVYHOVĚL viz body _____ DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.  Ing. JIŘÍ Šlapal FLEXIBILNÍ ENDOSKOPIE OLYMPUS C&S spol. s r.o. Dne <u>14-05-2008</u> Jméno a podpis zkoušejícího _____																																																																				

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.


 tÜV
CERT
DIN EN ISO 9001:2008

vwr c 311718301
 Funkc.zkouška
 Pmax 36 W
 LF 0.75
 Imax 0.43 A
 W 0.000 kWh
 t 00:01:40