

## Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 52 , odstavec 4

**Zákazník** \_\_\_\_\_ FN OLOMOUC \_\_\_\_\_

**Přístroj** \_\_\_\_\_ Monitor \_\_\_\_\_

**Typ** \_\_\_\_\_ COMPACT S/5 \_\_\_\_\_

**Výrobní číslo** \_\_\_\_\_ 4876106 \_\_\_\_\_

| Vyhovuje                            | Nevyhovuje               | Provedené kontroly.                            |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ovládací prvky, signalizace                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |

### Bezpečnostní test - měření

| Měřená veličina         |                | Naměřeno | Limit        |
|-------------------------|----------------|----------|--------------|
| Celkový unikající proud | Přístupná část | 0,18 mA  | max. 0,5 mA  |
|                         | Příložná část  | 0,01 mA  | max. 0,05 mA |
| Izolační odpor          |                | >20 MΩ   | min. 20 MΩ   |
| Odpor ochranného vodiče |                | 0,16 Ω   | max 0,2 Ω    |

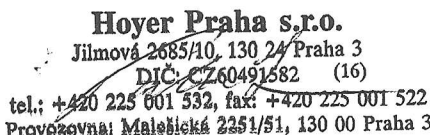
Reference: Servisní výkaz č. ....P120/07..... ze dne .....16.5.2007.....

### Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička Provedeno dne : 16.5.2007

Podpis :  Datum příští kontroly : 5/2008

**Hoyer Praha s.r.o.**  
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3  
DIČ: CZ60491582 (16)  
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522  
Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3