

## Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

<b>Zákazník</b>	FN Olomouc Datex-Ohmeda		
<b>Přístroj</b>	ADU	Monitor	
<b>Typ</b>	S/5	S/5	
<b>Výrobní číslo</b>	40007823	817252	i.č. I018599

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,29 mA      max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA      max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,16 Ω	max 0,2 Ω

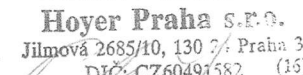
Reference: Servisní výkaz č. ....P 192/07..... ze dne ...17.7.07.....

### Výsledek prohlídky (závěr) : **vyhověl**

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Daniel Palička      Provedeno dne : 17.7.2007

Podpis :       Datum příští kontroly : 7/2008

**Hoyer Praha s.r.o.**  
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3  
DIČ: CZ60491582 (16)  
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 527

Hoyer Praha s.r.o., Jilmová 10, 130 24 Praha 3, Czech republic tel.+420 225 001 550, fax +420 225 001 522, [www.hoyer.cz](http://www.hoyer.cz)