


SERVISNÍ PROTOKOL		opraveno dne: 30. 8. 2005	servisní technik: HONDA
zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc		typ: NE-u 12	v.č.: 0201286
udaná závada: technická prohlídka	☐ záruční oprava ☒ pozáruční oprava		doklad

servisní výkon: diagnostika - při technické kontrole zjištěn prasklý kryt přístroje, opotřebovaný ultrazvukový krystal, vzduchový filtr, chybná zášlepa medik. tanku, kufel. aerosol rohože

doplňující údaje: - doplněno - výměna krytu a krystalu
- přezkoušení a el. bezpečnostní revize.

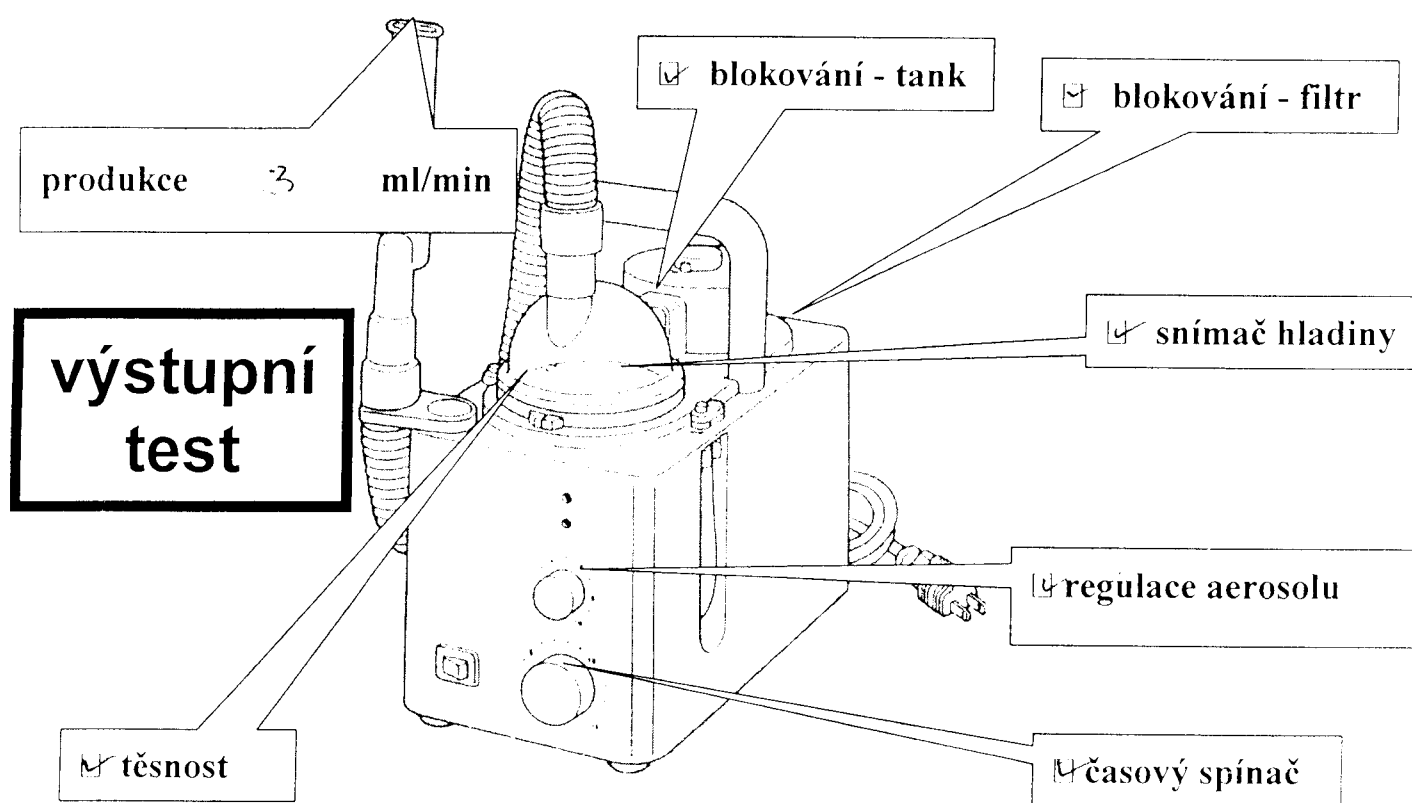

Na zdravotnickém prostředku byla provedena bezpečnostně-technická kontrola dle požadavků zákona č.346/2003 Sb. §52 a doporučení výrobce.

☒ Zdravotnický prostředek tyto požadavky splňuje.

Elektrická bezpečnost - revize dle ČSN 33 16 10, ČES 33.02.95 - měřeno přístrojem MEDITEST 50, v.č.200270			
Odpor ochrann. vodiče	0,77	Ω	unikající proud (přístupná část)
			0,08 mA

Nebulizátor **splňuje-nesplňuje** parametry deklarované výrobcem

Vadný materiál:

Protokol uschovejte pro případ reklamace. Záruka na opravu je 6 měsíců.

Poznámka:

Výrobce inhalátorů OMRON neurčuje termín periodických kontrol, ponechává toto na uživateli přístroje, dle činnosti používání.

Předepsaná je elektrická-bežnostní revize dle platné ČSN - další termín: 08/2006

OMRON
HONDA