

## PROTOKOL

**o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku**  
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

|                                   |                                                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Uživatel přístroje:<br>FN Olomouc | Umístění přístroje (klinika, oddělení):<br>Dětská klinika JIP 21C | Číslo smlouvy / objednávky:<br>9128 |
|                                   | Inventurní číslo: <u>I 018138</u>                                 |                                     |

|                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a typové označení přístroje:<br>Zvlhčovač Aquapor                                           | Výrobní číslo: ARLD-0071                                                            | Výrobce: Dräger                                                                                       |
|                                                                                                   | Verze SW:                                                                           | Rok výroby: 1997                                                                                      |
| Zkoušeno podle<br>VDE 0751 <input type="checkbox"/> IEC 601 <input checked="" type="checkbox"/>   | Třída ochrany:<br>I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> | Typ:<br>B <input checked="" type="checkbox"/> BF <input type="checkbox"/> CF <input type="checkbox"/> |
| Odpojitelný síťový přívod:<br>ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                     |                                                                                                       |

### Periodická provozní kontrola

|                                                          | vyhovuje<br>ano                     | ne                       | neprováděno                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Kontrola vnějších závad nebo poškození                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |
| Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |
| Ovládací prvky                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |
| Alarmové a bezpečnostní funkce                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |
| Funkční kontrola přístroje                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |
| Kontrola měřených veličin                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |
| Kalibrace měřených veličin                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Návod k použití                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |

### Kontrolní elektrická zkouška

|                                              | vyhovuje<br>ano                | ne   | neprováděno                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------|
| Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I): | 0,20                           | Ω    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Izolační stav přístroje:                     |                                |      |                                     |
| unikající proud                              | síťová část – přístupná část:  | 0,01 | mA                                  |
| unikající proud                              | síťová část – příložitná část: | mA   |                                     |

### Použité měřicí přístroje:


| Název, typ                 | Výrobní číslo | Platnost kalibrace |
|----------------------------|---------------|--------------------|
| Meditest 50                | 200199        | 01/2008            |
| Digitální tlakoměr DPI 705 | 70528998      | 09/2008            |
|                            |               |                    |

- Výsledek kontroly:**
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:  
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

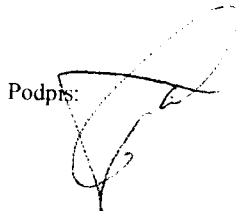

Kontrola provedena dne 27. 4. 2007

Termín příští kontroly: 12/2007

**Dräger** Medical s.r.o.  
Pod Sychrovem I-81  
101 00 PRAHA 10