



ZDRAVO s.r.o. – autorizovaný servis

Registrace dle § 31 zák.č.123/2000 Sb.,na Ministerstvu zdravotnictví – Č.j.-Reg.č.: 18577/01 a 18579/01

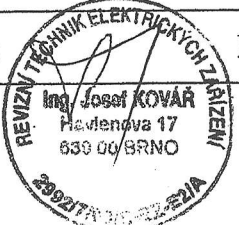

Periodická bezpečnostně-technická kontrola REVIZNÍ PROTOKOL 46/05/159	Inventární číslo
Přezkoušel: Ing.Josef Kovář	Výrobní číslo: MME400 0800 95 5978
Uživatel/vlastník: FN Olomouc-ortopedická klinika -OP	Výrobce: Martin Medizin-Technik Druh přístroje: Elektrochirurgie-Gerät Přístroj-typ: ME 400 CF Rok výroby: 01/M-138/90
Zkušební předpis: VDE 0750 ☐ VDE 0751/IEC 601 ☒ Revize provedena: nařízením zák.č.123/2000 Sb. ☒ po opravě ☒	
Výsledek zkoušky: ☒ 1. Měřené hodnoty – zadní strana zkušebního protokolu. a/ příloha BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71-výr.č.: 0008053368, kalibr.protokol: 631 / 2004 b/ VF měření: Power Meter EPM2, výr.č.: 9213-0053, kalibr.protokol : B0530303 c/ SCOPEMETER FLUKE 99,výr.č.:DM 6180498,kalibr.protokol : 623 / 2004 ☐ 2. Zjištěné závadné body: ☐ 3. Závady nenarušující bezpečnost – přístroj může být používán. ☐ 4. Přístroj může být používán po odstranění výše uvedených závad. ☐ 5. Závady vyžadují opravu před dalším použitím přístroje, protože jinak by mohli být ohroženi pacienti, zaměstnanci nebo třetí osoby. ☐ 6. ZP je bezpečný a funkční,vyhovuje ustanovení §52 odst.3,pro ZP klas.tř. I a IIa. ☒ 7. ZP vyhovuje technickým předpisům výrobce a splňuje požadavek dle §52 odst.4,5 a 6,pro ZP klas.tř.IIb. a III. ☒ 8. Zařízení je z pohledu bezpečnosti,schopné bezpečného provozu	
Datum: 15.12. 2005 Podpis:  Příští prohlídka připadá na: 12/2006	

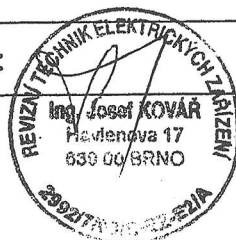

Revizní protokol


 Martin
 Medizín Technik
BENDER GmbH & Co.KG
Unimet 1000 ST

Typ/model ME400
 Identif. číslo ... FN 01-ort 10p-12/05
 Vyrobcce Martin med
 Sériové číslo MME400 0800 95 5978
 Norma měření IEC601-1
 Třída ochrany Třída I
 Příložená část ... Typ CF
 Připojení pacienta 4
 Jmenovité napětí . 230 V

Měření	Prahová hodnota	Výsledek
Odpor ochranného vodiče	#003 0.200	0.090 Ohm
PE měřicí proud	#083	25.4 A
Proud zátěží	#080	0.413 A
Provozní napětí	#081	228 V
Příkon	#082	0.093 kVA
Zemní unikající proud NC	#008 0.500	0.219 mA
Zemní unikající proud SFC	#009 1.000	0.442 mA
Unik.proud pac. NC DC	#223 0.010	< 0.001 mA
Unik.proud pac. NC AC	#323 0.010	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC DC	#225 0.050	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC AC	#325 0.050	0.004 mA
S přítomným sítovým napětím..	#031 0.050	0.009 mA
Pomocný proud pacientem NC DC	#235 0.010	< 0.001 mA
Pomocný proud pacientem NC AC	#335 0.010	< 0.001 mA
Pom. proud pacientem. SFC DC	#237 0.050	0.002 mA
Pom. proud pacientem. SFC AC	#337 0.050	< 0.001 mA

Poradí testovacích kroků

3, 83, 80, 81, 82, 7, 11, 12, 31, 33, 34, 223, 225, 229, 230, 235, 237
 241, 242, 323, 325, 329, 330, 335, 337, 341, 342, 8, 32, 224, 226, 236
 238, 324, 326, 336, 338, 9, 13, 227, 239, 327, 339, 10, 228, 240, 328
 340

Výsledek testu: Test proveden

Datum 15.12.2005
 Technik Ing. Josef Kovář
 Podpis

Unimet 1000 ST Verze: 3.71 Sériové číslo: 0950843546

Výrobní číslo : 008053368



Přezkoušel

Ing. Josef Kovář