


<b>SERVISNÍ PROTOKOL</b>		opraveno dne: 4. 8. 2005	servisní technik: Honza
zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc		typ: NE-U12	v.č.: 605-00077
udaná závada: technická kontrola	<input type="checkbox"/> záruční oprava <input checked="" type="checkbox"/> pozáruční oprava		doklad

servisní výkon: provedena technická kontrola a kompletní test, kontrola a nastavení nebulizačního výkonu produkce aerosolu, výměna opotřebovaného vzduchového filtru, doplňující údaje: el. bezpečnostní revize.

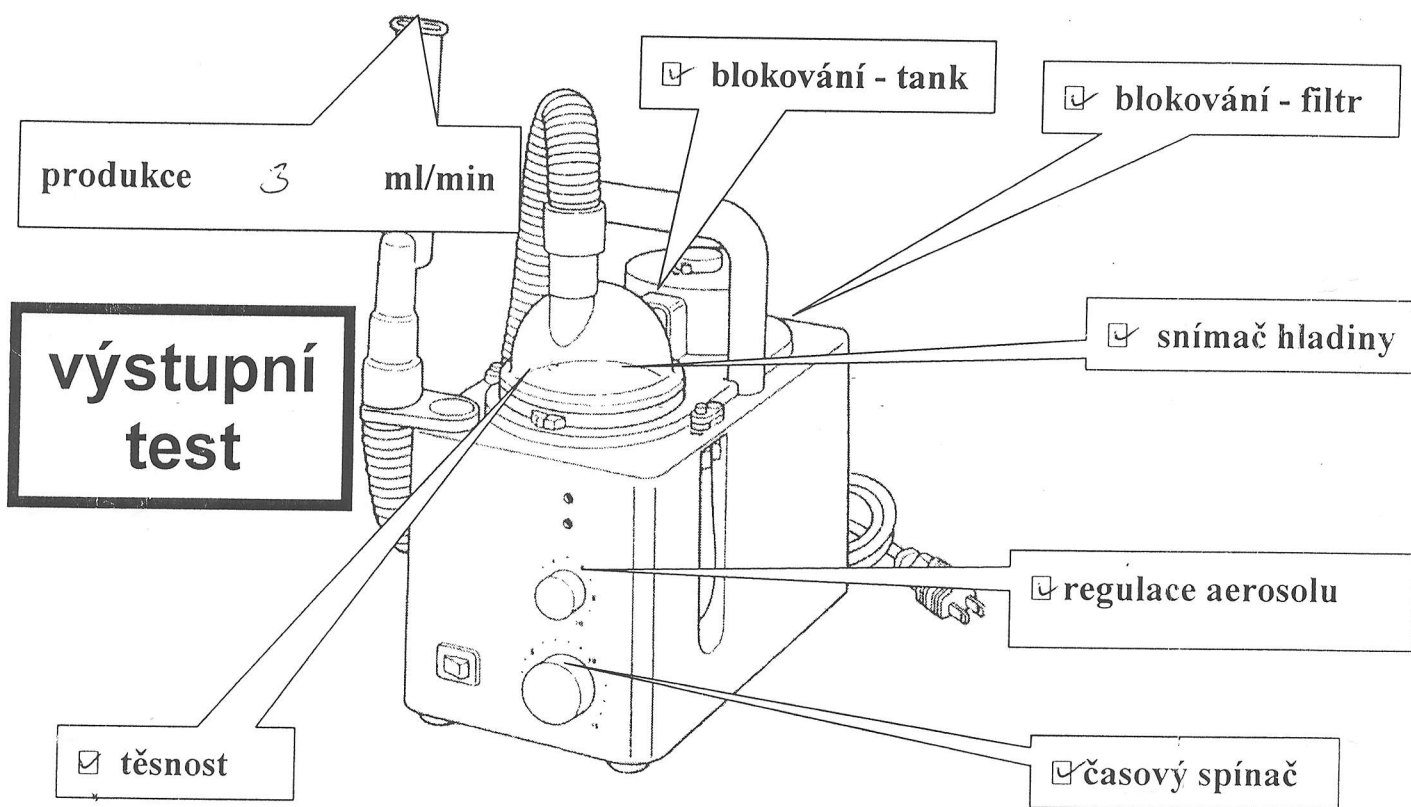

Na zdravotnickém prostředku byla provedena bezpečnostně-technická kontrola dle požadavků zákona č.346/2003 Sb. §52 a doporučení výrobce.

Zdravotnický prostředek tyto požadavky splňuje.

Elektrická bezpečnost - revize dle ČSN 33 16 10, ČES 33.02.95 - měřeno přístrojem MEDITEST 50, v.č.200270			
Odpor ochrann. vodiče	0,10	Ω	unikající proud (přístupná část)
			0,04 mA

Nebulizátor splňuje-~~nesplňuje~~ parametry deklarované výrobcem

Vadný materiál:

Protokol uschovejte pro případ reklamace. Záruka na opravu je 6 měsíců.

**Poznámka:**

Výrobce inhalátorů OMRON neurčuje termín periodických kontrol, ponechává toto na uživateli přístroje, dle četnosti používání.

Předepsaná je elektrická-bezpečnostní revize dle platné ČSN - další termín: 08/2006

