



# MEDIKO - SERVIS spol. s r.o.

## opravy a prodej zdravotnické techniky.

Výše uvedená firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obch. Soudem v Praze pod :oddíl C , vložka 16278

### Protokol o funkční kontrole a zkoušce dle ČSN EN 60601-1

Dle § 52 odstavec 4,5,6 zákona 123/2000 Sb.v plném znění  
( plné znění zákon 346/2003 Sb. )- zdravotnické prostředky .

Název zdravotnického prostředku :

**INHALÁTOR**

Typ :

**CLASSIC**

Výrobce :


**ARTSANA**

Výrobní číslo :

**1000200403 i.č. D056117-000**

OBJEDNÁVKA :

**Výkaz č. 215/1/2008**

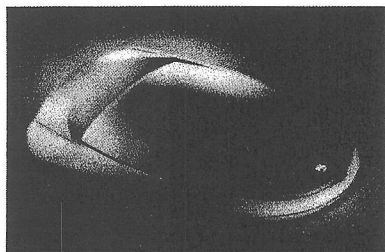

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC**

**I. P. Pavlova 6**

**775 20 OLOMOUC**

**Středisko : Otolaryngologická klinika NS : 1321**

**Pani Zbiralová , tel : 5884442813**

Číslo objednávky : **DIS0803433 , Paní Ludvíková**  
**588 443 125 , ivana.ludvikova@fnol.cz , Dispečink oprav**

Druh testu	vyhověl	nevyhověl				
<b>Funkční a bezpečnostní test zdravotnického prostředku podle předpisu výrobce : ( servisní manuál )</b>						
<b>A. MECHANICKÁ A VIZUÁLNÍ KONTROLA</b>			<b>MEDITEST vč. 200186</b>			
1. vnější kontrola přístroje	ANO	-----	Odpor ochr.. vodiče	$\Omega$	0,2	N / A
2.kontrola kabelů a konektorů	ANO	-----	Izolační odpor sítě proti krytu	$M\Omega$	$\geq 20$	$\geq 20$
3.vnitřní kontrola přístroje	ANO	-----	Izolační odpor používané části	$M\Omega$	$\geq 20$	N / A
<b>B. ELEKTRICKÁ KONTROLA</b>	ANO	-----	Unikající proud zemí	ACmA	0,5	0,000
4.kontrola síťových připojovacích kabelů	ANO	-----	Unikající proud zemí, I ch.o.v.	ACmA	1	N / A
5.kontrola napětí zdroje	ANO	-----	Unikající proud zemí, I ch.s..	ACmA	1	N / A
6.kontrola funkce tlačítka	ANO	-----	Unikající proud krytem	ACmA	0,5	0,000
<b>C. TEPLOTNÍ PODMÍNKY</b>	ANO	-----	Unikající proud krytem I ch.o.v.	ACmA	1	N / A
7.teplotní kontrola provozu přístroje ( 20min.)	ANO	-----	Unikající proud krytem I ch.s.	ACmA	1	N / A
<b>D. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE</b>	ANO	-----	Unikající proud pacientem	ACmA	0,01	0,000
<b>E. FUNKČNOST SYSTÉMU</b>	ANO	-----	Unikající proud pacientem 2	ACmA	0,05	N / A
8.kontrola funkce agregátu (tlak)	ANO	-----	Unikající proud pacientem 3	ACmA	0,05	N / A
9.kontrola ovládacích částí	ANO	-----				
10.kontrola těsnosti vodní komory	ANO	-----				
11.kontrola těsnosti medikační nádoby	ANO	-----				
12.kontrola prachového filtru	ANO	-----				
13.kompletní kontrola provozu přístroje	ANO	-----				
<b>Doporučení pro další kontrolu :</b>	<b>26.11.2009</b>					

#### POZNÁMKY :

- 1) oprava agregátů – nízký tlak
- 2) nový nebulizer
- 3) kompletní vyčištění

**Revidovaný přístroj splňuje technické podmínky výrobce a je schopen bezpečného provozu.**



**MEDIKO - SERVIS**  
spol. s r.o.  
Blatovská 1/1362  
100 00 Praha 10  
tel./fax: 74776087  
74778792

Periodickou kontrolu provedl : 26.11.2008

Soulavý Karel