

FORMED spol.s r.o.

Zdravotnická technika

Montáže, servis, doplňkové programy, obchodní a poradenská činnost

Bludovice 103 Nový Jičín 741 01

DIČ: 374 -13642481 IČO: 13642481 Obchodní rejstřík : Ostrava odd.C vložka 229

Pracoviště Bruntál

U potoka 14792 01 Bruntál Tel./Fax.: 0646 713145 E-mail: Formed_Bruntal@seznam.cz

Odběratel :

Fakultní nemocnice Olomouc**I. P. Pavlova 6****Olomouc****775 20****Kožní odd. - světloléčba**

Na základě objednávky č. **DO 8392** z roku **2005** jsme jako osoba splňující požadavky §31 a § 28 zákona **346/2003 Sb.** Provedli dne **15. 3. 2006** dle § 52 zák. č. **346/2003 Sb.**, dále státních norem týkajících se kontrol elektrických zdravotnických přístrojů, jejich částí a systémů v provozu z hlediska bezpečného stavu, obecně **ČSN 331500** a podrobně **ČSN EN 60601**, týkající se ověřování zdravotnických přístrojů jsme vypracovali na následujících přístrojích:

Vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku č.: **060315/001**

Přístroj	Typ Přístroje	Výrobce	Výrobní číslo	Třída ochr.	Naměřené hodnoty			Výrok
					Ri/MOhm	Rz/Ohm	I _{únik} /mA	
1 Přístroj kryochirurgický	KCH 4A/B	Chirana Brno	89 009	2	>20	2.tř.ochr.	0,05	Vyhovuje
2	---							
3	---							
4	---							
5	---							
6	---							

Závěr : Na výše uvedeném přístroji provedli technici: **P.Fürst, P. Šenfeldr a P. Finsterle** měření a naměřené hodnoty uvedli ve výkaze č. **2892**. Tento výkaz je nedílnou součástí protokolu. Dále bylo provedeno ověření stavu a funkčnosti přístrojů dle prováděcích listů, periodických bezpečnostně technických kontrol.


Výše uvedený přístroj vyhovuje našim současným provozním a bezpečnostním normám **ČSN 331500**, **ČSN EN 60601** a splňuje požadavky odstavce 4 § 52 zákona **346/2003Sb.** Jeho parametry jsou v souladu s parametry uváděnými výrobcem této techniky. Upřístroje je delší doba odtávání nástroje, což není v technických podmínkách jako parametr uváděno a garantováno, ale pro ohleduplnější podmínky ve vztahu k pacientovi i pro pohodlnější práci lékaře doporučuji toto řešit u servisní organizace opravou.

Použitá měřicí technika :

Název a typ měřidla	Výrobce	Výr. číslo	Platnost kalibrace
Teploměr digitální C-0121	Commet	1 900 068	14. červen 2006
Osciloskop PM3206	Philips	224587	
Multimetr digitální ME-22	Metex	BG756106	14. červen 2006
Osciloskop BM 584	Tesla	14433	14. červen 2006
Frekvenční čítač FC-1200	NSR	G 018763	18. červenec 2006
Měřič elektr. Předmětů PU 184	Metra Blansko	9695668	21 leden 2006

Další doporučený termín pro kontrolní měření je **březen.2007**Protokol byl podepsán a předán v **Olomouci** dne : 20. 3. 2006

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529

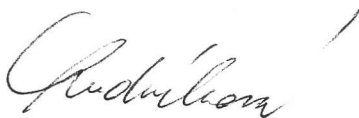

razítko a podpis pracovníka
přebírajícího odborný posudek

FORMED spol. s r.o.
Bludovice 103
741 01 NOVÝ JIČÍN
PACOVISTĚ BRUNTÁL
U POTOKA 14, 792 01 BRUNTÁL

razítko a podpis odpovědného
technika