

Servis lékařské praxe

Sladkovského 38
783 71 OLOMOUC-Holice
☎/fax: 585 418 912
☎ 585 750 157, 737 939 989
✉ slpraxe@volny.cz
ICO: 42959233 DIČ: CZ6011281628

V Olomouci dne 29.12. 2008

FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC
I.P. Pavlova 6
OLOMOUC
775 20

PROTOKOL O PROVEDENÉ TECHNICKÉ KONTROLE

dle zákona č. 123/2000
o zdravotnických prostředcích

Zařízení:

Název, typ, model: *SURGIC XT CAMURG. M. MOTOR*

Výrobce: *NSG - NAGAMISHI (JAPONSKO)*

Rok výroby:

Výrobní číslo(a): *PC 01400041; MOT. C7806019*

1) Ovládací jednotka

Funkce ovládacích prvků (tlačítek)	①	2	3	4
Funkce displeje	①	2	3	4
Funkce vodní pumpy	①	2	3	4
Software (reakce na pokyny, zobrazení údajů, paměti)	①	2	3	4
Stav krytu a mechanických částí	①	2	3	4
Stav napájecí šňůry	①	2	3	4
Celková funkčnost	①	2	3	4

2) Motor

Stav ložisek	1	2	3	4
Stav krytu a mechanických částí	1	2	3	4
Otáčkový rozsah, elektrická funkčnost	1	2	3	4
Stav přívodní šňůry vč. konektorů	1	2	3	4

3) Nožní ovladač

Stav ovládacích prvků (tlačítek)	1	2	3	4
Plynulost regulace regulátoru otáček	1	2	3	4
Stav krytu a mechanických částí	1	2	3	4
Stav přívodní šňůry vč. konektorů	1	2	3	4

4) Kompletní set

Stav celého přístroje jako celku	1	2	3	4
----------------------------------	---	---	---	---


Způsob bodového hodnocení:


- 1 – vyhovuje
- 2 – drobné poškození neohrožující správný chod a bezpečnost
- 3 – vážné poškození či závada vyžadující opravu či výměnu (možno používat se zvýšenou opatrností)
- 4 – vážné poškození či závada vylučující bezpečný provoz (zákaz okamžitého používání)

Závěr:

LOŽISKA M. MOTORU JEVI ZNAMKY OPOTŘEBENÍ, UTELE
 ODPovídá DOBĚ POUŽÍVÁNÍ A Z TOHOTO DŮVODU
 JE MOTOR HLUCNEJŠÍ. CELKOVÝ STAV JE
 VYHOVJÍCÍ PRO DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ.
 DALŠÍ KONTROLA 12/09

Vypracoval:

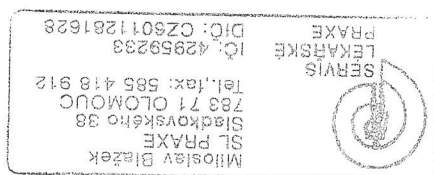


 Viliam Sitár
 Autorizovaný servisní technik
 SL Praxe

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL EL. PŘEDMĚTU č. 081223
dle doporučení ČES 33.03.95.

NÁZEV PŘEDMĚTU	TYP	VÝROBCE	VÝR. ČÍSLO	INV.ČÍSLO
Chirurgický systém Surgic XT		NSK NAKANISHI INC JAPAN	01Y00041	FN OLOMOUC C005396-000
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	JMENOVITÝ PROUD	JMENOVITÝ PŘÍKON	TŘÍDA OCHRANY	
U = 230 V	I = --- A	P = 48 VA	I	
MAJITEL (UŽIVATEL) PŘEDMĚTU				
Miloslav Blažek - Servis lékařské praxe Sladkovského 38 783 71 00 Holice Olomouc				
DRUH SÍTOVÉHO PŘÍVODU			DÉLKA [m]	
El. předmět odnímatelný přívod.			2 m	
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE U EL. PŘEDMĚTU TŘ. I			Rpř. = 0,07 Ω	vyhovuje
IZOLAČNÍ ODPOR			Ri = 200 MΩ	vyhovuje
UNIKAJÍCÍ PROUD SÍŤOVÁ ČÁST - ČÁST PŘÍSTUPNÁ DOTYKU			Iu = 0,04 mA Id = 0,02 mA	METODA Iu ochr. vod. Id
SÍŤOVÁ ČÁST - PŘÍLOŽNÁ ČÁST			Id = 0,02 mA	Id
ČÁST PŘÍSTUPNÁ DOTYKU - PŘÍLOŽNÁ ČÁST			Id = 0,02 mA	Id
POŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE	NÁZEV	TYP	VÝR.ČÍSLO	
MĚŘIČ MALÝCH ODPORŮ	EASYTEST		98054286	
MĚŘIČ IZOLAČ. ODPORŮ	EASYTEST		98054286	
MĚŘIČ UNIKAJÍCÍHO PROUDU	PU 184 DELTA		9728426	
CELKOVÉ HODNOCENÍ	VYHOVĚL - NEVYHOVĚL			
DATUM	MĚŘENÍ PROVEDL (jmeno, podpis)			
23.12.2008	Ing. Sobotka Zdeněk 3859/7/04/R-EZ-E2/A Jívová 5 783 16 Dolany u Olomouce			
Měření bylo provedeno za přítomnosti majitele (uživatele) el. předmětu.				
POZNÁMKY :				
ZÁVADY : Bez závad.				