

FORMED spol.s r.o. Prodej a servis zdravotnické techniky, revize zdravotnických a elektrických přístrojů

Bludovice 103
741 01 Nový Jičín
tel. : 556 701 949, 556 710 089
www.formed.cz

*Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického přístroje
Podle § 27 a 52 zák. 123 / 2000 sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95
K výkazu práce č.001899*


Datum a místo provedení kontroly	22. 11. 2005 Olomouc
Název a typ přístroje	EKG Chirastar 60
Výrobní číslo	RE 769
Inventární číslo	014784
Majitel přístroje	FN Olomouc
Umístění přístroje	KÚČOCH odd. 33

Vzhledová kontrola	
- kryt přístroje	Vyhovuje
- ovládací prvky, klávesnice	Vyhovuje
- síťový přívod	Vyhovuje
- příslušenství	Vyhovuje

Kontrola funkce	
- kontrola testu při zapnutí přístroje	---
- kontrola funkce ovládacích prvků	Vyhovuje
- kontrola parametrů	Vyhovuje
- kontrola ochrany a signalizace	Vyhovuje

Kontrola stavu akumulátoru	Vyhovuje
----------------------------	----------

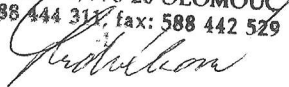
Kontrolní elektrická zkouška / tř.II	Měřidlo: PU 184 v.č. 9689795
- odpor ochranného vodiče u př.tř. I	
- izolační stav přístroje	>20 MOhm
- unikající proud	
- síťová. část – část přístupná dotyku	0,01 mA
- síťová část – příložná část	0,01 mA
- část přístupná dotyku – příložná část	0,06 mA

Závěrečné hodnocení	Přístroj vyhovuje normám ČSN 331500 a ČSN EN 60601
Datum a podpis technika	22. 11. 2005 Axmann Milan
Příští kontrola	22. 11. 2006 

Měřidla : multimetr MX 52 v.č. 922247610200, EKG Phantom 320 v.č. 2334

Převzal:

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529


28. 11. 2005