

Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku(PBTK)

dle § 27 zák. č. 123/2000 Sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95

Č. protokolu...01/Pa/FNO/08...

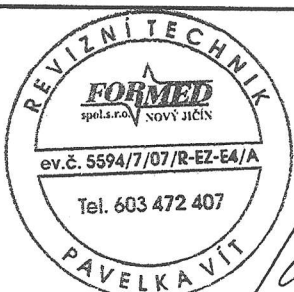
K výkazu práce č. ...002271.....

Datum a místo provedení kontroly	22.7.2008 Olomouc
Název a typ přístroje	Motodláha ARTROMOT - S
Výrobní číslo	S - 005261
Inventární číslo	I019035-000
Majitel přístroje	Fakultní Nemocnice Olomouc , I. P. Pavlova 6, Olomouc
Umístění přístroje	Klinika rehabilit. a tělových. lékařství lůžkové odd. 44

Mechanická/vzhledová kontrola		Kontrola funkce	
Kryty	Bez závad	Ovládací prvky	Bez závad
Šroubové spoje	Bez závad	Parametry	Bez závad
Ovládací prvky	Bez závad	Ochrany a signalizace	Bez závad
Příslušenství	-----		

Kontrola elektrických prvků		Kontrolní elektrická zkouška	
Síťový přívod	Bez závad	Třída: II.	
Vodič ochr. pospojení	-----	Odpor ochr. vodiče	$R_z = \text{----- } \Omega$
Izolace vodičů	Bez závad	Izolační stav	$R_i > 20 \text{ M}\Omega$
Elektrické spoje	Bez závad	Unikající proud (síťová část-část přístup. dotyku)	$I_d = 0,01 \text{ mA}$
Akumulátor	-----	Měřidlo	PU184 vč: 154956013

Závěrečné hodnocení	Výše uvedený přístroj vyhovuje dalšímu bezpečnému provozu v souladu s platnými normami ČSN 331500 a ČSN EN 60601 a splňuje technické požadavky stanovené výrobcem této techniky.
Datum příští kontroly	07/2009

Kontrolu provedl: Pavelka	Za provozovatele převzal
 	Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika dispečink oprav I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC tel.: 588 443 125, fax: 588 443 529 