
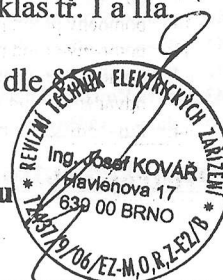


ZDRAVO s.r.o. – autorizovaný servis

Registrace dle § 31 zák.č.123/2000 Sb.,na Ministerstvu zdravotnictví – Č.j.-Reg.č.: 18577/01 a 18579/01

FRANKE

Periodická bezpečnostně-technická kontrola REVIZNÍ PROTOKOL 38-06-197	Inventární číslo 020105
Přezkoušel: Ing.Josef Kovář	Výrobní číslo: 01461180.CZ12
Uživatel/vlastník: FN Olomouc- geriatrie odd.48	Výrobce: FRANKE FINLAND OY Druh přístroje:Automat.desinfekční přístroj Přístroj-typ: DEKO 190 E Rok výroby: 2001
Zkušební předpis: VDE 0750 ☐ VDE 0751/IEC 60601-1 ☒ Revize provedena: nařízením zák.č.123/2000 Sb. ☒ po opravě ☐	
Výsledek zkoušky: ☒ 1. Měřené hodnoty – zadní strana zkušebního protokolu. a/ příloha BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71-výr.č.: 0008053368, kalibr.protokol: 631 / 2005 b/ SCOPEMETER FLUKE 99,výr.č.:DM 6180498,kalibr.protokol : 623 / 2005 ☐ 2. Zjištěné závadné body: ☐ 3. Závady nenarušující bezpečnost – přístroj může být používán. ☐ 4. Přístroj může být používán po odstranění výše uvedených závad. ☐ 5. Závady vyžadují opravu před dalším použitím přístroje, protože jinak by mohli být ohroženi pacienti, zaměstnanci nebo třetí osoby. ☒ 6. ZP je bezpečný a funkční,vyhovuje ustanovení §52 odst.3,pro ZP klas.tř. I a IIa. ☐ 7. ZP vyhovuje technickým předpisům výrobce a splňuje požadavek dle §52 odst.4,5 a 6,pro ZP klas.tř.IIb. a III. ☒ 8. Zařízení je z pohledu bezpečnosti,schopné bezpečného provozu	
Datum: 18.6.2006 Podpis:	Příští prohlídka připadá na: 9.2007

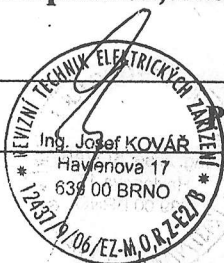

Revizní protokol: 38-06-197

Typ přístroje: DEKO 190E

Výrobní číslo: 01461180.CZ12

	je v pořádku	není v pořádku	odpadá kontr.	poznámky
1. typový štítek	X			
2. návod k použití	X			
3. popis přístroje	X			
4. mycí komora	X			
5. těsnění dveří	X			
6. rotační sprchy	X			
7. pevné trysky	X			
8. filtr odpadu	X			
9. instalace a ovládání	X			
10. zámek dveří	X			
11. čerpadlo na detergent	X			
12. přídatné čerpadlo na detergenty				
13. sifonový ventil	X			
14. elektro. ventily studené, teplé a destil. vody	X			
15. vzduchový ventil systému	X			
16. oběhové čerpadlo (zvuk, projev)	X			
17. kalové filtry	X			
18. netěsnost	X			
19. Elektrické funkce	X			
20. el. příklady, rozvody	X			
21. cykly programu	X			
22. opláchnutí studenou vodou	X			
23. opláchnutí teplou vodou	X			
24. mytí – krátké/dlouhé-teplou vodou	X			
25. desinfekce-T=90-93°C	X			
26. konečný oplach stud./destilovanou vodou	X			
27. vyprázdnění komory	X			

Bez
chem./mech.indikace28. ☒ jednotlivá měření

a/ příloha BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71

ser.č.:0008053368

☐ graf

Poznámky:

Elektrické měření: přezkoušení dle normy DIN IEC 60601-1 nebo VDE 0751

29. izolační odpor sítě proti obalu	MΩ
30. izolační odpor používané části	MΩ
31. měření odporu ochranného vedení	Ω
32. nízkofrekvenční odváděný proud – normální případ	μA
33. nízkofrekvenční odváděný proud – 1. chybný případ	μA
34. odváděný proud obalu – normální případ	μA
35. odváděný proud obalu – 1. chyba ochranného vodiče	μA
36. odváděný proud obalu – 1. chyba sítě	μA
37. odváděný proud pacienta – normální případ	μA
38. odváděný proud pacienta – ojedinělá chyba ochranného vodiče	μA
39. odváděný proud pacienta – ojedinělá chyba sítě	μA
40. pomocný proud pacienta – normální případ	μA
41. pomocný proud pacienta – 1. chyba ochranného vodiče	μA
42. pomocný proud pacienta – 1. chyba sítě	μA
43. odváděný proud pacientem – vers. paralel. U na používané části	μA
44. dto – odváděný proud pacientem – fázově zaměřeno	μA

a/ příloha
BENDER – Unimet
1000 ST verze: 3.71
ser.č.:0008053368

Přístroj ke kontrole do: 09-2007

kým: FN Olomouc-geriatrie odd.48





ZDRAVO s.r.o., autorizovaný servis
Protokol o revizní zkoušce 38-06-197

Data přístrojů

Identif. číslo	FN OL-020105	Délka kabelu [m]	-
Typ / Model	FRANKE 190 E	Jmenovitý příkon [kW]	-
Výrobce	FRANKE	Pořadí měření	Automatický
Výr. č.	01461180.CZ12	Přiložená část	Typ B
Přístr. konstr.	2001	Připojení pacienta	-
Norma měření	IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995	Budova	geriatrie
Charakteristiky	Standardní zařízení (obecně)	Oddělení	odd.48
Třída ochrany	Třída I	Místnost	-
Jmenovité napětí [V]	230	Poznámka	-


Měř. č.	Naměřená hodnota	Prahová	Výsledek	Jednot	Prošel
3	Odpor ochranného vodiče trvale přiložený vodič	0.200	0.084	Ohm	ANO
83	PE-měřicí proud standard		25.5	A	
80	Zatěžovací proud standard		0.025	A	
81	Provozní napětí standard		231	V	
82	Příkon standard		0.006	kVA	
7	Zemní svodový proud NC standard	0.500	0.001	mA	ANO
12	Zemní svodový proud NC FE uzemněn	0.500	0.001	mA	ANO
70	Zemní svodový proud SFC síťový přívod otevřen 3fáz. proud	1.000	0.001	mA	ANO
81	Provozní napětí standard		230	V	
70	Zemní svodový proud SFC síťový přívod otevřen 3fáz. proud	1.000	0.001	mA	ANO
81	Provozní napětí standard		230	V	
70	Zemní svodový proud SFC síťový přívod otevřen 3fáz. proud	1.000	0.001	mA	ANO

Výsledek z pohledu bezpečnosti >> Vyhovuje <<

Datum : 18.6.2006

Technik : Ing. Josef Kovář

Podpis

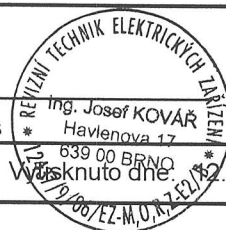

Stran 1/1

Výr. č. 008053368

UNIMET®1000/1100ST

V3.71

Výsknuto dne: 12.9.2006

