

Název zdravotnického prostředku:

**Volumetrická infuzní pumpa
ALARIS GW**

Typ:

S/N (výrobní číslo): 250427555

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invent. č. C006103 - 000

A. Vizuální kontrola

 X Nepoškozen Poškozen

**B. Funkční a bezpečnostní test zdravotnického prostředku podle předpisu výrobce
(Servisní manuál – Alaris , 8000PB00001 vydání A.0)**

Pol.	Název testu	Postup	Výsledek testu
1.	Kontrola SW verze	10/3	V 5.1.F
2.	Autotest	10/5	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
3.	Kontrola interního akumulátoru	10/2	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
4.	Kontrola přesnosti dávkování	10/6	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
5.	Test alarmů	10/7	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
6.	Kontrola funkce BOLUS	10/9	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
7.	Kontrola Error log	10/4	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
8.	Ověření elektrické bezpečnosti	ČSN EN 60601-1	
8.1.	Test vyrovnání potenciálu	kapitola 18	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
8.2.	Test trvale unikajících proudů a pomocných proudů pacientem	kapitola 19	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl

C. Závěrečné vyhodnocení výsledků provedených testů


 X Vyhověl Nevyhověl

D. Provedené servisní úkony:
E. Poznámky a doporučení: Příští kontrola II / 2009

Provedl: Ing. Jiří Hanslian

Dne: 15. 2. 2008

Podpis:

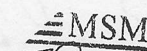
 MSM, spol. s r. o.
 Diace Medical Instruments
 P.O. Box 120, Lhota u Příbramě 13
 261 81 Příbram
 (4)

**PROTOKOL O PERIODICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
dle zákona 123/2000 Sb.**

Obsah tohoto protokolu je duševním vlastnictvím výrobce zdravotnického prostředku a firmy MSM, spol. s r. o.

Měření elektrické bezpečnosti:

**** SEAWARD RIGEL 266 ****

Appliance Number

Asena GW SN 250427555

.....
Date

15. 2. 2008

.....
User

FN Olomouc – hematookologie, odd. 5C

.....
Class: I, Type CF

EARTH (1A)
00.11 OHM

INS (500V) - EUT
99.99 MEG

EARTH LEAKAGE


- 1. (N) <0.040 mA
- 2. (R) <0.040 mA
- SF: Neutral Open
- 3. (N) <0.040 mA
- 4. (R) <0.040 mA

ENCLOSURE LEAKAGE

- 1. (N) <0.040 mA
- 2. (R) <0.040 mA
- SF: Neutral Open
- 3. (N) <0.040 mA
- 4. (R) <0.040 mA
- SF: Earth Open
- 5. (N) <0.040 mA
- 6. (R) <0.040 mA

Status **PASS**

Signature

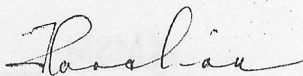

.....