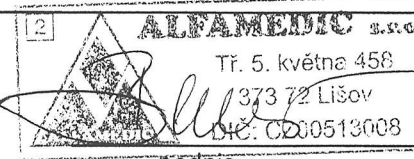


PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$	
TŘÍDA OCHRANY: <u>I</u>	
SESTAVA: ☐ ☒ ☐ přístroj měřen samostatně (nevypĺňuje se délka (m)) přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....m přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m	
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): <u>0,11</u> ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD: ☐ ☒ ☐ síťová část - přístupná část $N = 0,06 \text{ mA}$ $U = 0,02 \text{ mA}$ $R = 0,09 \text{ mA (max 1mA)}$ síťová část - příložná část $N = 0,042 \text{ mA}$ $U = 0,020 \text{ mA}$ (max 0,5mA) přístupná část - příložná část $R = 0,009 \text{ mA}$ (max 0,5mA)	
POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324	
vyhověl - nevyhověl vyhověl - nevyhověl	
vyhověl - nevyhověl vyhověl - nevyhověl	
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady:	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: <u>7/2007</u>	
KONTROLU PROVEDL: V <u>LITOVÉ</u> DNE <u>15.7.2006</u> 	
POTVRZENÍ ORGANIZACE: podpis Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika dispečink oprav I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ tel.: 588 442 281, fax: 588 442 525	

Ryif