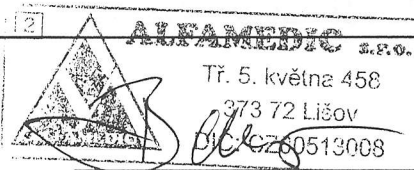
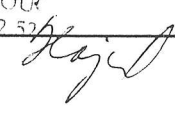


# PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| TRÍDA OCHRANY: <u>II</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| <b>SESTAVA:</b><br><input type="checkbox"/> přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m))<br><input checked="" type="checkbox"/> přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....m<br><input type="checkbox"/> přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): <u>                    </u> ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| <b>UNIKAJÍCÍ PROUD:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> síťová část - přístupná část<br>$N = 0,00 \text{ mA}$ $U = 0,00 \text{ mA}$ $R = 0,06 \text{ mA (max 1mA)}$<br><input checked="" type="checkbox"/> síťová část - příložná část<br>$N = 0,009 \text{ mA}$ $U = 0,003 \text{ mA}$ (max 0,5mA)<br><input checked="" type="checkbox"/> přístupná část - příložná část<br>$R = 0,005 \text{ mA}$ (max 0,5mA) |                                                                                                                                                                             |
| POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324                                                                                                                                                    |
| <b>VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:</b> vyhověl <del>-nevyhověl-</del><br><b>VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95 :</b> vyhověl <del>-nevyhověl-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| <b>VÝSLEDEK KONTROLY:</b> bez závad<br><del>-závady-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| <b>ZÁVĚR:</b> BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE<br>ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje <del>-nevyhovuje-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| <b>TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE:</b> <u>7/2007</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| <b>KONTROLU PROVEDL:</b><br>V LÍPOVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DNE 27.7.2006<br><div style="text-align: right;"> <br/>           podpis         </div> |
| <b>POTVRZENÍ ORGANIZACE:</b><br><div style="text-align: right;">           Fakultní nemocnice Olomouc<br/>           odbor hlavního mechanika<br/>           dispečink oprav<br/>           I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUK<br/>           tel.: 588 442 281, fax: 588 442 537<br/>  </div>                                        |                                                                                                                                                                             |