

Protokol

o kontrole elektrického zdravotnického přístroje provedené dle ČSN 33 1610

Název přístroje: MYC ADE ZINFILKNI AUTOMAT	Inventární číslo: 1017722
Majitel přístroje: FN OLMOUC CENTRUM OPERACNI SALY	Kategorie používání: D

Výrobce: MIELE	Rok výroby:	Výrobní číslo: 16/18327129
Typové označení: C7782C	Un* (V) 400	In* (A) 16
	Pn* (W) 9,7kw	Třída ochrany: I

*Uvedte jmenovité hodnoty elektrického předmětu

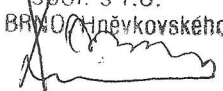
Datum kontroly	Podmínky měření			Opor ochranného vodíče u tř. I (Ω)	Izolační stav – náhradní měření					
	Sestava 1)	Délka (m)	Materiál síťového přívodu		Síťová část- přístupná část		Síťová část- příložná část		Příložná část- přístupná část	
					Metoda 2)	I (mA)	Metoda 2)	I (mA)	Metoda 2)	I (mA)
22.12.2006	P	2	CY	0,05	R	5,9				
Výsledek kontroly										
Zjištěné závady (vyjádření, závěry atd.)									Celkové hodnocení 3)	
Přístroj v pořádku									V	

1) Uvedte: S- přístroj měřen samostatně (neuvádějí se následující sloupce)
P-přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem
O-přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

2) Uvedte: N-měření náhradního unikajícího proudu
U-přímé měření unikajícího proudu
R-měření rozdílového proudu

3) Uvedte: V - vyhověl
N - nevyhověl

Kontrolu provedl: jméno: Kukuřička

Miele
spol. s r.o.
617 00 BRNO Hněvkovského 81b
podpis: 

Zákazník: FN. OLOMOUC

Typ přístroje: G7782CD

Výr. číslo: 1618327129

Měřicí - vizuální - a funkční kontrola	B	Nález: Nedostatečný	X
--	---	---------------------	---

Všeobecná kontrola:	B	Stav u automatických praček:	B	Stav u plynového / parního vytápění:	B
1 Skříň / Dveře	✓	44 Vnitřní buben		84 Funkce zapalovací pojistky	
2 Přítok vody / Napouš. ventily	✓	45 Vnější buben		85 Obraz plamene	
3 Výšky hladiny vody	✓	46 Vypínač nevyváženosti		86 Zapalovací svíčka / Termočlánek	
4 Směr otáčení / Reversace		47 Protizávaží		87 Plynový / parní ventil	
5 Otáčky	✓	48 Vyplachovací skříňka		88 Kontrola těsnosti	
6 Hlučnost chodu	✓	49 Plovákový spínač		89 Tlak plynu	
7 Ložiska		50		90	
8 Vypouštěcí ventil / Čerpadlo	✓	Stav sušiček:		Stav u myčky nádobí:	
9 Odtok vody / Zpětný ventil	✓	51 Buben		91 Měření vstupní vody (stupeň něm. tvrdosti)	
10 Síta / Filtr	✓	52 Ventilátor		92 Mycí lázeň - tvrdost, koncentrace	
11 Hadice	✓	53 Napínací - vodící - opěrné kladky		93 Změkčovací zař. - nastavení	
12 Gumová těsnění	✓	54 Elektr. snímač vlhkosti		94 Zásobník na mycí prostředky	
13 Hnací řemeny		55 Ochlazovací ventilátor		95 Nádržka pro prostředky k docílení lesku	
14 Tlumiče / Upevnění		56 Kondenzátor par		96 Ostřikovací ramena / Oběžné kroužky	
15 Pružiny (pera)	✓	57		97 Ostřikovací ramena - počet otáček	
16 Dveřní uzávěr	✓	58		98 Spojení s nádobou se solí	
17 Topné přípojky	✓	Stav odstředivek:		99 Cirkulační čerpadlo	
18 Topná tělesa - prostup	✓	59 Buben		100 Košíky - vložky	
19 Usazeniny (inkrustace)	✓	60 Směr otáčení		101 Mycí prostředek / Prostředek k docílení lesku / Sůl	
20 Termostaty	✓	61 Brzda		102	
21 Hladinové spínače	✓	62 Blokování		103	
22 Kontrolní žárovky		63		104	
23 Motory / Uhlíkové kartáče		64		105	
24 Kondenzátory	✓	65		Stav u mycích strojů pro profesionální a klinické užití:	
25 Stykače / Relé	✓	Stav u žehlicích strojů:		106 Otvírání zásobníku práš. mycího prostředku	✓
26 Spínače / tlačítka	✓	66 Válec / Průměr		107 Čerpadlo neutral. detergentu	
27 Spínací zařízení		67 Nábal vrchní		108 Poškození vlivem neutral. detergentu	
28 Ovládací elektronika	✓	68 Vstupní pásový dopravník		109 Nádobí na neutral. detergent, kontrola množství	
29 Snímač řídících štítků		69 Žehlicí vana		110 Cirkulační čerpadlo - směr otáčení	✓
30 Šroubové - zástrčkové spojení		70 Přítlak		111 Protokol o tepelném proměření	
31 Kabeláž / Připojovací kabel	✓	71 Ochrana prstů		112 Kondenzátor par	✓
32 Průběh programu	✓	72 Ventilátor upotřebeného vzduchu		113 Kontrola desinfekčních parametrů	
33 Bezpečnostní předpisy	✓	73 Převodovka		114 Dávkovače oplach. prostředku (olej, ap.)	✓
34 Stabilita	✓	74 Mazání dle plánu		Stav u sušičích agregátů:	
35		75 Nádobka pro objemovou roztažnost oleje		115 Teplota	✓
36		76 Stav oleje		116 Filtry	✓
37		77 Kompresor - stav oleje		117 Vzduchové kanály	✓
38		78 Odlučovač vody		118 Funkce	✓
39		79		119 Těsnost	✓
40		80		120	
41		81		121	
42		82		122	
43		83		123	

Závady byly ihned odstraněny: ANO

Závady budou odstraněny dne:

Datum: 22.12.2008

Technik:

Kuklaček

Kontrola bezpečnosti elektrického zařízení:

A Vizuální kontrola

B Připojení na síť a ohebná vedení

C Ochranné vodiče

✓

✓

✓