
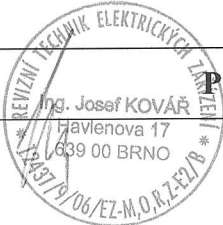


ZDRAVO s.r.o. – autorizovaný servis

Registrace dle § 31 zák.č.123/2000 Sb.,na Ministerstvu zdravotnictví – Č.j.-Reg.č.: 18577/01 a 18579/01

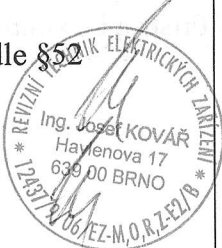

Periodická bezpečnostně-technická kontrola REVIZNÍ PROTOKOL 34-07-261	Inventární číslo : IO 20067
Přezkoušel: Ing. Josef Kovář Číslo oprávnění: 12437/9/06/EZ-M,O,R,Z-E2/B	Výrobní číslo: ML501R 0900 01D578 Výrobce: Martin Medizin-Technik
Uživatel/vlastník: FN Olomouc COS02	Druh přístroje: vyšetřovací světlo Přístroj-typ: ML 501R Rok výroby: 2001 Datum instalace:
Zkušební předpis: VDE 0750 ☐ VDE 0751/IEC 60601-1 ☒ Revize provedena: nařízením zák.č.123/2000 Sb. ☒ po opravě ☐	
Výsledek zkoušky: ☒ 1. Měření hodnoty – zadní strana zkušebního protokolu-použité přístroje : a/ příloha BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71-výr.č.: 0008053368, kalibr.protokol: 631 / 2007 b/ SCOPEMETER FLUKE 99,výr.č.:DM 6180498,kalibr.protokol : 623 / 2007 c/ Intenzita světla-MAVOLUX digital výr.č.:OB57839, kalibr.protokol :10/00 ☐ 2. Zjištěné závadné body: ☐ 3. Závady nenarušující bezpečnost – přístroj může být používán. ☐ 4. Přístroj může být používán po odstranění výše uvedených závad. ☐ 5. Závady vyžadují opravu před dalším použitím přístroje, protože jinak by mohli být ohroženi pacienti, zaměstnanci nebo třetí osoby-datum odstranění:..... ☒ 6. ZP je bezpečný a funkční,vyhovuje ustanovení §52 odst.3,pro ZP klas.tř. I a IIa. ☐ 7. ZP vyhovuje technickým předpisům výrobce a splňuje požadavek dle §52 odst.4,5 a 6,pro ZP klas.tř.IIb. a III. ☒ 8. Zařízení je z pohledu bezpečnosti,schopné bezpečného provozu	
Datum: 06-2007 Podpis: 	Příští prohlídka připadá na: 06-2008 

Revizní protokol: 34-07-261

Typ přístroje: ML501 R

Výrobní číslo: ML501R090001D578

V souladu s předpisy výrobce je kontrola zaměřena na revizi následných částí:

vyhovuje/rameno

nevyhovuje

odpadá
kontr.

poznámky

1. typový štítek ,návod k použití, popis přístroje
2. **Přezkoušení vyrovnaní potenciálu-R vedení**
3. mobilní světlo (max.0,3 ohm)
4. pevné(stropní,nástěnné) světlo (max.0,3 ohm)
5. **Přezkoušení stropní konstrukce a nos. ramen**
6. stabilita nástěnné/stropní konstrukce
7. poškození nosných /výložných/ ramen
8. funkce nosných /výložných/ ramen
9. funkce mechanických a magnet brzd
10. **Přezkoušení tělesa reflektorů**
11. funkční kontrola dle návodu k použití
12. kontrola nasvíceného pole
13. kontrola fokuzace
14. kontrola bezpečnostního skla a segmentů filtru
15. kontrola steril.držadla
16. **intenzita nasvícení pole**
17. **naměřená hodnota: 70 klux**
18. **napájení světla dle jmenovitého zatížení**
19. **přepnutí ze sítě na baterie/záložní systém/**
20. **naměřená hodnota napětí**
21. **na snímacích kontaktech : 24 Vdc**
22. **na fokuzacním adaptéru: Vdc**
23. **Všeobecně :**
24. kontrola provedla provozní test a potvrdila funkční stav

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

x

Předepsané hodnoty :

model	Svítivost Ec
ML101	10-20klx
ML201	25-38klx
ML301	30-40klx
ML501	70-95klx
ML701	97-110klx
ML701	120-135klx
ML702	145-160klx
ML1001	125-145klx

-na kontaktech při max.svítivosti :

model	Napájecí napětí
ML301	13,5 Vac
ML501e	24-40Vdc
ML701e	24-40Vdc
ML702HX	24-27V dc
ML1001E	24-40Vdc

25. ☒ jednotlivá měření-

26. BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71,ser.č.:0008053368

☐ Graf

27. příloha – periodická revize elektro

28. ☒ vizuální kontrola pracovních částí zařízení, kontrola zapojení přírodních kabelů a ochranných krytek,dotažení uchycení

Poznámka :

Přístroj ke kontrole do: 06-2008

kým: FN Olomouc- COS

