

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KCH JIP	Číslo smlouvy / objednávky: DIS 0700516
	Inventární číslo: 19724	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 4		Výrobní číslo: ARRM-0235	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐	IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
		Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐	

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☒	☐	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐	☐
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	0,20	Ω	☒ ☐ ☐
Izolační stav přístroje:			
unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,20	mA ☒ ☐ ☐
unikající proud	síťová část – příložná část:	0,001	mA ☒ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	01/2008
Digitální tlakoměr DPI 705	70533133	09/2008
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	09/2008


Výsledek kontroly:	☒	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
	☐	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
	☐	přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 28. 5. 2007

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

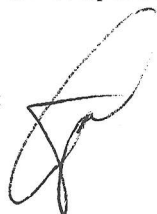

Termín příští kontroly: 12/2007

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10