

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům
zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník	FN OLOMOUC, Kardiochirurgická klinika, JIP		
	I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc		
Přístroj	Defibrilátor		
Typ	Responder 1100		
Výrobní číslo	101094875	Inventární číslo	IO19745-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.	
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)	
		Funkční kontrola	
x	☐	Test ovládacích tlačítek	
x	☐	Test signalizace	
x	☐	Test akustické signály	
x	☐	Automatické vybití po 60 sec.	
x	☐	Test kardioverze	
x	☐	Test akumulátoru – 20 výbojů 360J	
x	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 11 sec.	
Bezpečnostní test - měření			
Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,01 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,002 mA	max. 0,05 mA



- 2 -

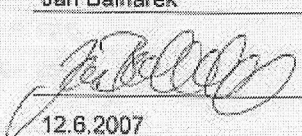
Kontrola energie defibrilačního výboje		
Nastavená energie	Naměřená hodnota	Povolená tolerance
2	1,6	1-3
5	4,8	4-6
7	6,7	6-8
10	9,3	8-12
20	19,0	18-22
30	28,8	28-32
50	50,1	47-53
100	101	93-107
200	207	185-215
300	311	278-322
360	357	333-387

Výsledek prohlídky (závěr):

Parametry přístroje odpovídají – neodpovídají hodnotám předepsanými výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je – není plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	204 028
Tester defib. QED-5 v.č.	59 971

Technik	Jan Balhárek
Podpis technika	
Datum kontroly	12.6.2007
Datum další dop. kontroly	Po jednom roce