

### Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

**Zákazník** FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
 Kardiochirurgická klinika, JIP 50A *020 50 5011*

**Přístroj** EKG

**Typ** MAC 5000

**Výrobní číslo** M1MP7074 I019762-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
X	<input type="checkbox"/>	<b>Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)</b>
X	<input type="checkbox"/>	Auto test po zapnutí
X	<input type="checkbox"/>	Test ovládacích tlačítek
X	<input type="checkbox"/>	Test EKG obvodů, zobrazení amplitudy a periody QRS
X	<input type="checkbox"/>	Test tiskárny
<b>Bezpečnostní test – měření</b>		

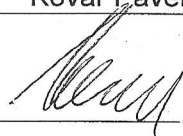
Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,08 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,007 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,18 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje **odpovídají** hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	200 341
------------------	---------

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	01.08.2008
Další doporučená periodická kontrola	08/2009