

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
 I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Přístroj Monitor životních funkcí

Typ DASH 3000

Výrobní číslo K1DJ 5691 G *inv. IO 198B*

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.	
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)	
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace, displej	
☒	☐	Kalibrace NIBP	
☒	☐	Kalibrace EKG	
☒	☐	Kalibrace BP	
Bezpečnostní test - měření			

Měřená veličina	Naměřeno		Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,32 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,008 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor	720 MΩ		min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	914 Ω		max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsaným výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:


Meditest 50 v.č. 900 187	

Technik : Jan Balhárek

Provedeno dne :

20.11.2006

Podpis :

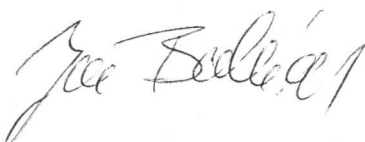

Datum příští kontroly :

Po jednom roce