

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník	FN OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc	Kardiochirurgická klinika-JIP 50A
Přístroj	Monitor životních funkcí	
Typ	SOLAR 8000M	
Výrobní číslo	Solar-L1RF8270G, Tram-J1TW0281G, Tram Rac-L1ST6600G	
Inventární číslo	IO19759-000	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.	
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)	
x	☐	Ovládací prvky, signalizace	
x	☐	Displeje	
x	☐	Kalibrace NIBP	
Bezpečnostní test - měření			

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,47 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,007 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,11 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č. 204 028	
-------------	--------------	--


Technik :

Jan Balhárek

Provedeno dne :

22.11.2007

Podpis :

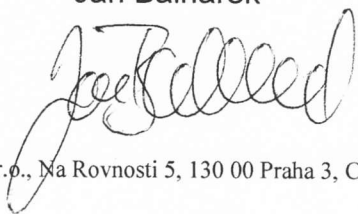

Datum příští kontroly :

Po jednom roce