

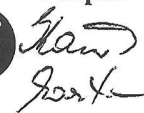
BLANCO-CZ

BLANCO-CZ, spol. s.r.o.
Příborská 258
Chlebovice
73942 Frýdek-Místek
Česká Republika

I 019981

KONTROLNÍ PROTOKOL

v souladu se zněním zákona 123/2000 Sb, o zdravotnických prostředcích

- | | | | | | |
|----|----------------------------|---|--|---|--|
| 1 | Dodavatel kontroly: | BLANCO-CZ, spol. s.r.o,
Příborská 258,
Chlebovice,
73942 Frýdek-Místek, | Kontrolu provedl: | Martin KAŇA | Podpis:

 |
| 2 | Evid. štítek: | Ano | Datum kontroly: | 21.8.07 | |
| 3 | Zákazník: | Fakultní nemocnice Olomouc
Oddělení hlavního mechanika
I.P. Pavlova 6
77520 Olomouc | Kontrolu požaduje: | AKC konstrukce, spol.
s.r.o
Pivovarská 10
756 61 Rožnov pod
Radhoštěm | |
| 4 | Popis zařízení: | ne | | | |
| 5 | Název zařízení: | Stojan na misky s ohřevem | | | |
| 6 | Katalog číslo: | 5440020 | | | |
| 7 | Sériové číslo: | 688 | | | |
| 8 | TEST-zkouška | Specifikace parametrů | Testovací metoda | Výsledek | Stav |
| | Bezpeč. zkouška | 230V | Rigel 233.002 | 228V | Vyhovuje |
| | Rigeltest | >5 MΩ | Rigel 233.002 | >100 MΩ | Vyhovuje |
| | | <0,2 Ω | Rigel 233.002 | 0,09 Ω | Vyhovuje |
| | | max. 500 μA | Rigel 233.002 | 40 μA | Vyhovuje |
| | | max. 1000 μA | Rigel 233.002 | 80 μA | Vyhovuje |
| | | max. 100 μA | Rigel 233.002 | <1 μA | Vyhovuje |
| | | max. 500 μA | Rigel 233.002 | 40 μA | Vyhovuje |
| | | max. 500 μA | Rigel 233.002 | <1 μA | Vyhovuje |
| | Vysokonapěťová zkouška | 1,5 kV (1s) | Aut. zkušební systém,
09210099600013 | Ano | Vyhovuje |
| | Měření vodivosti | 0-10 kΩ | Měřič izolací Siemens
M05225-A113-A1 | 1 kΩ | Vyhovuje |
| | Zkušební provoz | 30° / 40° / 50° / 60°C ± 2°C | Dig. teploměr
GMMH175, sonda Pt
1000 | 29 / 41 / 48 / 58 °C | Vyhovuje |
| | Kontrola výr. štítku | Prac. pokyn 17/2004 | Vizuální kontrola | Ano | Vyhovuje |
| | Kontrola povrchu | Výkres 5440020 | Vizuální kontrola | Ano | Vyhovuje |
| | Kontrola funkcí | Funkční ovládání vypínání
regulace teploty | Manuální kontrola | Ano | Vyhovuje |
| | | Nastavování výšky topné desky | Manuální kontrola | Ano | Vyhovuje |
| | | Funkční vodící kladky | Manuální kontrola | Ano | Vyhovuje |
| 9 | Poznámky: | Provedena výměna přívodního kablu a kab. vývodky, opraveno rozdělení stojanu.
Provedeno měření parametrů a el. revize výrobku dle zkuš. předpisu Nr. 7003/1 fa Blanco. | | | |
| 10 | Závěr kontroly: | Výrobek splňuje podmínky použití dle návodu k obsluze, na základě provedené kontroly testů funkčnosti a bezpečnosti ve výrobnímu závodu fa BLANCO. Periodická kontrola se provádí dle návodu k obsluze 1x ročně, nyní nejpozději však do 20.8.2008. | | | |

BLANCO CZ, spol. s.r.o.
Prodej / Verkauf
Příborská 258, CZ-739 42 Chlebovice
Tel.: 555 530 051 Fax: 555 530 050
IČO: 603 21 296 DIČ: CZ60321296