

KONTROLNÍ PROTOKOL č.: * 000130 ze dne: 26.9.08

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku podle zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Antonín Prucek
 Žižkov 326
 783 45 Senice na Hané
 IČO: 48775550
 Tel.: 585 947 278

ČÍSLO OBJEDNÁVKY :

713 0802460

Zákazník: <i>FN Olomouc</i>	Název / typ přístroje <i>Parní sterilizátor STERIDENT</i>
Umístění přístroje <i>Kardio OP</i>	Výrobní číslo/ rok výroby <i>020 402 / 2002</i>
Výrobce: <i>BMT Bino</i> Země: <i>ČR</i>	Inventární číslo: <i>I 019 884-000</i>
Napětí: <i>230V</i> Poh. přívod: ano/ne, délka m	Příkon: <i>2,4k</i> VA/W Třída ochrany: <i>I</i>

Kontrolní bezpečnostně technická prohlídka (KBTP):

Byla provedena KBTP přístroje ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěr:

ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno seřízení, odzkoušení a posouzení splnění technických požadavků stanovených pro zdravotnický prostředek.

Přístroj (~~JE~~ / ~~NENÍ~~) plně funkční a (~~SCHOPEN~~ / ~~NESCHOPEN~~) bezpečného provozu.

Samolepka o termínu příští kontroly vylepena: ano/ne*

Číslo doporučení ČES 33.03.95, k normám ČSN EN 60601-1

Elektrická bezpečnost – měření		
odpor ochr. vodiče	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	zjištěno: <i>0,05</i> Ω
unikající proud	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	zjištěno: <i>0,57</i> mA
přechodový odpor PA ¹⁾	<input type="checkbox"/> vyhovuje	zjištěno: Ω
izolační odpor	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	zjištěno: <i>> 199</i> M Ω

Použitá měřidla

MEDITEST 50 ev. číslo 976 632

Termín příští KBTP:

září 2009


Datum vystavení protokolu: <i>29.9.08</i>	Jméno technika: <i>Pur Z.</i>	Razítko a podpis SELET <i>Pur Z.</i> servisní oddělení Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané
----------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokol převzal dne:	Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika dispečink oprav I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC tel.: 588 443 123, fax: 588 442 529	6-10-2008 <i>Čudalbon</i>	počet příloh: <i>1</i>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------

¹⁾ neměří se ve všech případech

STERIDENT kardiochirurgie FN Olomouc

SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

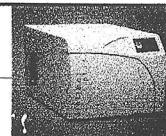

Datum: 26.9.2008

Číslo šarže: 03657

Výrobní číslo: 030120

Prováděný úkon

Perioda měs.

Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola	pozn.	6 / 12	
Koncovka čerpání a výpusti vody			x		x		x	x
Zásobní nádržky					x		x	x
Vnitřní prostor přístroje		x					x	x
Těsnění dveří		x			x		x	x
Zavírací mechanismus dveří					x			x
Chladicí ventilátory		x					x	x
Chladič vývěvy		x					x	x
Elektroinstalace - porušení					x		x	x
Těsnost armatury					x			x
Koncové spínače dveří					x			x
Vakuum vývěvy					x			x
Snímače teploty					x			x
Snímače tlaku				x	x			x
Těsnost komory - VT					x		x	x
Bowie-Dick test průniku páry					x		x	x
Bakteriologický filtr	x						x	x
Tlakový spínač komory					x			x
Sterilizační cyklus					x		x	x
Pojistný ventil komory					x		x	x
Pojistný ventil vyvíječe					x		x	x
Topení pláště				x	x			x
Tlakový snímač vyvíječe				x				x

Unikající proud (mA):

0,54

Max. 3 mA

x

Odpor ochranného vodiče (ohm) :

0,05

Max. 0,1Ω

x

Izolační odpor (Mohm) :

>19,9

> 19 MΩ

x

Přístroj po prohlídce:

- při používání dle návodu **JE - ~~NENÍ~~ - funkční**

- při dodržení bezpečnostních předpisů **JE - ~~NENÍ~~ - bezpečný**

Příští prohlídka:

září 2009

Připomínky, doporučení:

inv.č. IO-19 884-000

Provedl: Půr Radek

Podpis:

SELET [®]
servisní oddělení
Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané

SELET - Antonín Prucek,
Žižkov 326, 783 45 SENICE NA HANÉ

IČO: 487 75 550

Tel: 585 947 278, Fax: 585 947 011, e-mail: selet@selet.cz