

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona
123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník:	Fakultní nemocnice Olomouc
	I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Oddělení:	Intenzivní péče chirurgických oborů
Přístroj:	Polohovací lůžko
Typ:	MULTISCAN
Výrobní číslo:	192396/3/1/0697
Třída ochrany:	II.

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
----------------------------------	----------	------------

Funkční zkouška

Kontrola elektrického ovládání		
Kontrola dvojice tlačítek pro současnou poloh. zádového a stehenního dílu	✓	
Kontrola dvojice tlačítek pro polohování stehenního dílu	✓	
Kontrola dvojice tlačítek pro polohování zádového dílu	✓	
Kontrola dvojice tlačítek pro nastavení podélného náklonu ložné plochy	✓	
Kontrola dvojice tlačítek pro nastavení výšky ložné plochy	✓	
Kontrola dvojice tlačítek pro nastavení laterálního náklonu ložné plochy		
Kontrola tlačítka pro nastavení resuscitační polohy-turbo CPR		
Kontrola centrálního STOP tlačítka		
Kontrola zeleného tlačítka-napájení lůžka proudem ze sítě		
Kontrola červené kontrolky-signalizace stavu záložní baterie		
Kontrola zámku pro blokadu polohování stehenního dílu	✓	
Kontrola zámku pro blokadu polohování zádového dílu	✓	
Kontrola potvrzovacího tlačítka		
Kontrola zámku pro blokadu nastavení výšky ložné plochy a jejího náklonu	✓	
Kontrola tlačítka pro nastavení „vyšetřovací polohy“ (podélného i lineární)		
Kontrola tlačítka pro nastavení polohy „kardiacké křeslo“		
Kontrola pro nastavení „Trendelenburgovy polohy“		
Kontrola zámku pro blokadu všech polohovacích funkcí		
Kontrola vázícího systému		
Kontrola hydraulického ovládání		
Kontrola mechanického ovládání		
Kontrola mechanické CPR odblokování zádového a stehenního dílu	✓	
Kontrola brzdového systému	✓	
Kontrola rastového mechanismu, nastavení lýtkového dílu		
Kontrola blokadace postranice	✓	
Celková mechanická kontrola konstrukce lůžka	✓	

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část síťová	0,01 mA	1 mA
	Příložná část síťová	0,001 mA	0,5 mA
	Izolační odpor ochranného vodiče		0,3 Ω


Použité měřicí přístroje:	- manometr –přípravek
	- voltometr M 2012
	- Meditest 50

Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: František Valouch

Podpis

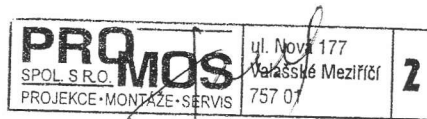

Datum prohlídky: 26.06.2006

Datum další doporučené prohlídky: červen 2007