

Projekt (akce):

 Fakultní nemocnice Olomouc
 Pavlova 6 Olomouc

č. obch. případu:

Po instalaci byly převzaty tyto výrobky:

typ výrobku:	výrobní číslo:	místo instalace:	IK *)	IP *)
SECUREX HP 9612-2FD	010929	centrální sterilizace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SECUREX HP 9612-2FD	010936	centrální sterilizace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DNISTERI 336-2FD	011082	centrální sterilizace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ULTRAMATIC TTD	243040072 091004072	centrální sterilizace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formomat 349-2	010916	centrální sterilizace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*) IK = instalační kontrola, IP = instruktáž personálu.

 Záznamy instalační kontroly P2 QPP 19-10 a instruktáže personálu P3 QPP 19-10 přiloženy.
 Instalované výrobky odpovídají podmínkám smlouvy a jsou schopny provozu.

Po převzetí budou předávajícím provedeny následující práce:

 Instruktáž personálu bude provedena dodatečně
 v termínu který určí objednatel

Poznámky a doplnění:

 Ke všem přísluším bylo dodáno kompletní
 příslušenství dle kupní smlouvy
 + záruční listy ke všem přísluším


Datum převzetí: 19. 12. 2001

Předávající:

 BMT a.s., Cejl 48-50, 656 60 Brno, CZ
 IČO: 46346996, DIČ: 288-46346996,
 tel.: +42 (0) 5 45 53 71 11,
 fax: +42 (0) 5 45 21 17 50.

Přebírající:

 FAKULTNÍ NEMOCNICE
 OLOMOUC
 odbor investiční výstavby

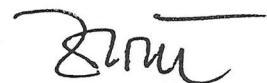

O. HASÍK

:meno



:podpis

:meno

:podpis

1. Instalovaný přístroj

Druh: *Parní sterilizátor*
Typ: *SECUREX HP 9612-2 FD*
Výrobní číslo: *01 09 36*
Výrobce:

2. Provozovatel

Obchodní jméno: *Fakultní nemocnice Olomouc*
Adresa: *Pavla 6 Olomouc*
IČO: *000 988 92* DIČ: *379-000 988 92*
Umístění přístroje: *centrální sterilizace*

3. Dodaná dokumentace a doklady

- Návod k použití a údržbě
 Technický popis rentgenu
 Revizní kniha tlakové nádoby sterilizátoru
 Revizní kniha tlakové nádoby vyvíječe páry
 Prohlášení o shodě nebo ujištění, že bylo vydáno
 Prohlášení, že přístroj vyhověl výstupní kontrole

4. Okolí, provozní prostředky a odpad

- vyhovuje specifikaci: poznámka:
- | | | | | | |
|--|--------------|----------------|--------|---|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> okolí: | teplota | <i>25</i> | °C | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| | rel. vlhkost | <i>39,2</i> | % | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| | tlak | <i>1000,1</i> | mbar | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| <input checked="" type="checkbox"/> el. rozvod: | napětí | <i>405</i> | V | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| <input checked="" type="checkbox"/> pára - ext. zdroj: | tlak | <i>2,7</i> | bar | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| <input checked="" type="checkbox"/> tlakový vzduch: | tlak | <i>2</i> | bar | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| <input checked="" type="checkbox"/> chladicí voda: | tlak | <i>4,5</i> | bar | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| | teplota | <i>15</i> | °C | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| | tvrdost | <i>úpravna</i> | mmol/l | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| <input type="checkbox"/> napájecí voda: | tlak | <i>/</i> | bar | <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| (pro vyvíječ) | vodivost | <i>/</i> | µS/cm | <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
| <input checked="" type="checkbox"/> odpad: | | | | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne |
- rozvod páry: vyhovuje, nevhovuje
způsob úpravy:

5. Bezpečnostní systémy a testovací programy

- vyhovuje specifikaci
- | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------|--------------|----|
| <input type="checkbox"/> připojení ochranného vodiče: | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | odpor ochr. vodiče: | <i>0,048</i> | Ω |
| <input type="checkbox"/> průchodnost pojistných ventilů: | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | unikající proud: | <i>0,01</i> | mA |
| <input type="checkbox"/> bezpečnostní lišty dveří (jsou-li ve výbavě): | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | | | |
| <input type="checkbox"/> vakuový test (výsledek): | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | | | |
| <input type="checkbox"/> Bowie-Dick test (výsledek): | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | | | |
| <input type="checkbox"/> kontrolní snímek rtg: | <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | | | |

6. Kontrolní provoz (s prázdnou komorou)

- zjištěna odchylka od specifikace programu: ne ano jaká:
- zjištěno nežádoucí elektromagnetické rušení: ne ano zdroj:
- zjištěn nežádoucí únik provozního prostředku: ne ano kterého:
- zjištěno nežádoucí kolísání kvality provozního prostředku: ne ano kterého:
- zjištěna jiná závada: ne ano jaká:

7. Poznámky a doplnění

8. Závěr: Kontrola prokázala - neprokázala správnou instalaci a shodu s požadovanými specifikacemi výrobce.

BMT a.s.,
Cejl 48-50, 656 60 Brno, CZ
tel.: (+420) 5 45 53 71 11
fax: (+420) 5 45 21 17 50

18.12.2007

(datum kontroly)

D. HAJÍK

(jméno a podpis technika)

1. Instalovaný přístroj

Druh: *Parní sterilizátor*
Typ: *SECUREX HP 9612-2FD*
Výrobní číslo: *010929*
Výrobce:

2. Provozovatel

Obchodní jméno: *Fakultní nemocnice Olomouc*
Adresa: *Pavlova 6 Olomouc*
IČO: *000 988 92* DIČ: *379-000 988 92*
Umístění přístroje: *centrální sterilizace*

3. Dodaná dokumentace a doklady

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Návod k použití a údržbě | <input type="checkbox"/> Revizní kniha tlakové nádoby vyvíječe páry |
| <input type="checkbox"/> Technický popis rentgenu | <input checked="" type="checkbox"/> Prohlášení o shodě nebo ujištění, že bylo vydáno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revizní kniha tlakové nádoby sterilizátoru | <input type="checkbox"/> Prohlášení, že přístroj vyhovět výstupní kontrole |

4. Okolí, provozní prostředky a odpad

- | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------|---|-----------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> okolí: | teplota | <i>25</i> | °C | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | vyhovuje specifikaci: poznámka:

rozvod páry: <input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje, <input type="checkbox"/> nevyhovuje

způsob úpravy: |
| | rel. vlhkost | <i>39,2</i> | % | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |
| | tlak | <i>1000,1</i> | mbar | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |
| <input checked="" type="checkbox"/> el. rozvod: | napětí | <i>405</i> | V | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |
| <input checked="" type="checkbox"/> pára - ext. zdroj: | tlak | <i>2,7</i> | bar | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |
| <input checked="" type="checkbox"/> tlakový vzduch: | tlak | <i>7</i> | bar | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |
| <input checked="" type="checkbox"/> chladicí voda: | tlak | <i>4,5</i> | bar | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |
| | teplota | <i>25</i> | °C | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |
| | tvrdost | <i>úprava</i> | mmol/l | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |
| <input type="checkbox"/> napájecí voda: | tlak | <i>—</i> | bar | <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |
| (pro vyvíječ) | vodivost | <i>—</i> | µS/cm | <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |
| <input checked="" type="checkbox"/> odpad: | | | | <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | |

5. Bezpečnostní systémy a testovací programy

- | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------|-------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> připojení ochranného vodiče: | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | odpor ochr. vodiče: | <i>0,05</i> | Ω |
| <input checked="" type="checkbox"/> průchodnost pojistných ventilů: | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | unikající proud: | <i>0,01</i> | mA |
| <input checked="" type="checkbox"/> bezpečnostní lišty dveří (jsou-li ve výbavě): | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vakuový test (výsledek): | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bowie-Dick test (výsledek): | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | | | |
| <input type="checkbox"/> kontrolní snímek rtg: | <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | | | |

6. Kontrolní provoz (s prázdnou komorou)

- | | | | |
|--|--|------------------------------|----------|
| zjištěna odchylka od specifikace programu: | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano | jaká: |
| zjištěno nežádoucí elektromagnetické rušení: | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano | zdroj: |
| zjištěn nežádoucí únik provozního prostředku: | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano | kterého: |
| zjištěno nežádoucí kolísání kvality provozního prostředku: | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano | kterého: |
| zjištěna jiná závada: | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano | jaká: |

7. Poznámky a doplnění

8. Závěr: Kontrola prokázala - neprokávala správnou instalaci a shodu s požadovanými specifikacemi výrobce.

1. Instalovaný přístroj
 Druh: *Formaldehydový Nebilizátor*
 Typ: *Formomat 399-2*
 Výrobní číslo: *010916*
 Výrobce:

2. Provozovatel
 Obchodní jméno: *Fakultní nemocnice Olomouc*
 Adresa: *Pavlova 6 Olomouc*
 IČO: *000 988 92* DIČ: *379-000 988 92*
 Umístění přístroje: *centrální nebilizace*

3. Dodaná dokumentace a doklady

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Návod k použití a údržbě <i>LK</i>
<input type="checkbox"/> Technický popis rentgenu
<input type="checkbox"/> Revizní kniha tlakové nádoby sterilizátoru | <input type="checkbox"/> Revizní kniha tlakové nádoby vyvíječe páry
<input type="checkbox"/> Prohlášení o shodě nebo ujištění, že bylo vydáno
<input type="checkbox"/> Prohlášení, že přístroj vyhověl výstupní kontrole |
|--|--|

4. Okolí, provozní prostředky a odpad

- | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------|---|--|----|---------|----------------|--------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> okolí: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">teplota</td><td style="width: 10%; text-align: center;"><i>25</i></td><td style="width: 10%;">°C</td></tr> <tr><td>rel. vlhkost</td><td style="text-align: center;"><i>39,2</i></td><td>%</td></tr> <tr><td>tlak</td><td style="text-align: center;"><i>1000,1</i></td><td>mbar</td></tr> </table> | teplota | <i>25</i> | °C | rel. vlhkost | <i>39,2</i> | % | tlak | <i>1000,1</i> | mbar | vyhovuje specifikaci: poznámka: | <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne |
| teplota | <i>25</i> | °C | | | | | | | | | | |
| rel. vlhkost | <i>39,2</i> | % | | | | | | | | | | |
| tlak | <i>1000,1</i> | mbar | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> el. rozvod: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">napětí</td><td style="width: 10%; text-align: center;"><i>405</i></td><td style="width: 10%;">V</td></tr> </table> | napětí | <i>405</i> | V | <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | | | | | | |
| napětí | <i>405</i> | V | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> pára - ext. zdroj: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">tlak</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;">bar</td></tr> </table> | tlak | | bar | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | | | | | | |
| tlak | | bar | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> tlakový vzduch: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">tlak</td><td style="width: 10%; text-align: center;"><i>7</i></td><td style="width: 10%;">bar</td></tr> </table> | tlak | <i>7</i> | bar | <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | | | | | | |
| tlak | <i>7</i> | bar | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> chladicí voda: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">tlak</td><td style="width: 10%; text-align: center;"><i>4,5</i></td><td style="width: 10%;">bar</td></tr> <tr><td>teplota</td><td style="text-align: center;"><i>15</i></td><td>°C</td></tr> <tr><td>tvrdost</td><td style="text-align: center;"><i>4plavba</i></td><td>mmol/l</td></tr> </table> | tlak | <i>4,5</i> | bar | teplota | <i>15</i> | °C | tvrdost | <i>4plavba</i> | mmol/l | <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne |
| tlak | <i>4,5</i> | bar | | | | | | | | | | |
| teplota | <i>15</i> | °C | | | | | | | | | | |
| tvrdost | <i>4plavba</i> | mmol/l | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> napájecí voda: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">tlak</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;">bar</td></tr> </table> | tlak | | bar | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | | | | | | |
| tlak | | bar | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> (pro vyvíječ) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">vodivost</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;">µS/cm</td></tr> </table> | vodivost | | µS/cm | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | | | | | | |
| vodivost | | µS/cm | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> odpad: | | <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | | | | | | | | | |
- rozvod páry: vyhovuje, nevyhovuje
 způsob úpravy:

5. Bezpečnostní systémy a testovací programy

- | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|-------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> připojení ochranného vodiče: | <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | odpor ochr. vodiče: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%; text-align: center;"><i>0,05</i></td><td style="width: 20%;">Ω</td></tr> </table> | <i>0,05</i> | Ω |
| <i>0,05</i> | Ω | | | | |
| <input type="checkbox"/> průchodnost pojistných ventilů: | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | unikající proud: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%; text-align: center;"><i>0,09</i></td><td style="width: 20%;">mA</td></tr> </table> | <i>0,09</i> | mA |
| <i>0,09</i> | mA | | | | |
| <input type="checkbox"/> bezpečnostní lišty dveří (jsou-li ve výbavě): | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vakuový test (výsledek): | <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | | | | |
| <input type="checkbox"/> Bowie-Dick test (výsledek): | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | | | | |
| <input type="checkbox"/> kontrolní snímek rtg: | <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne | | | | |

6. Kontrolní provoz (s prázdnou komorou)

- | | | | |
|--|--|------------------------------|----------|
| zjištěna odchylka od specifikace programu: | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano | jaká: |
| zjištěno nežádoucí elektromagnetické rušení: | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano | zdroj: |
| zjištěn nežádoucí únik provozního prostředku: | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano | kterého: |
| zjištěno nežádoucí kolísání kvality provozního prostředku: | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano | kterého: |
| zjištěna jiná závada: | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> ano | jaká: |

7. Poznámky a doplnění

8. Závěr: Kontrola prokázala - neprokázala správnou instalaci a shodu s požadovanými specifikacemi výrobce.

BMT a.s.
 Cejl 48-50, 656 60 Brno, CZ
 tel.: (+420) 5 45 53 71 11
 fax: (+420) 5 45 21 17 50

18.12.2007

O. HASÍK O. W

(datum kontroly)

(jméno a podpis technika)

1. Instalovaný přístroj

Druh: *Parní sterilizátor*
Typ: *UMISTERI 336-LFD*
Výrobní číslo: *01 10 82*
Výrobce:

2. Provozovatel

Obchodní jméno: *Fakultní nemocnice Olomouc*
Adresa: *Palouka 6, Olomouc*
IČO: *600 988 92* DIČ: *379-000 988 92*
Umístění přístroje: *centrální sterilizace*

3. Dodaná dokumentace a doklady

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Návod k použití a údržbě | <input type="checkbox"/> Revizní kniha tlakové nádoby vyvíječe páry |
| <input type="checkbox"/> Technický popis rentgenu | <input checked="" type="checkbox"/> Prohlášení o shodě nebo ujištění, že bylo vydáno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revizní kniha tlakové nádoby sterilizátoru | <input type="checkbox"/> Prohlášení, že přístroj vyhověl výstupní kontrole |

4. Okolí, provozní prostředky a odpad

<input checked="" type="checkbox"/> okolí:		teplota	<i>25</i>	°C	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	vyhovuje specifikaci: poznámka:
	rel. vlhkost	<i>39,2</i>	%	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne		
	tlak	<i>1000</i>	mbar	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne		
<input checked="" type="checkbox"/> el. rozvod:	napětí	<i>405</i>	V	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne		
<input checked="" type="checkbox"/> pára - ext. zdroj:	tlak	<i>2,7</i>	bar	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	rozvod páry: <input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje, <input type="checkbox"/> nevyhovuje	
<input checked="" type="checkbox"/> tlakový vzduch:	tlak	<i>7</i>	bar	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne		
<input checked="" type="checkbox"/> chladicí voda:	tlak	<i>4,5</i>	bar	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne		
	teplota	<i>15</i>	°C	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne		
	tvrdost	<i>úprava</i>	mmol/l	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne		
<input type="checkbox"/> napájecí voda:	tlak	<i>—</i>	bar	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne		
(pro vyvíječ)	vodivost	<i>—</i>	µS/cm	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	způsob úpravy:	
<input checked="" type="checkbox"/> odpad:				<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne		

5. Bezpečnostní systémy a testovací programy

<input checked="" type="checkbox"/> připojení ochranného vodiče:	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	odpor ochr. vodiče:	<i>0,05</i>	Ω
<input checked="" type="checkbox"/> průchodnost pojistných ventilů:	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	unikající proud:	<i>0,01</i>	mA
<input type="checkbox"/> bezpečnostní lišty dveří (jsou-li ve výbavě):	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
<input checked="" type="checkbox"/> vakuový test (výsledek):	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
<input checked="" type="checkbox"/> Bowie-Dick test (výsledek):	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
<input type="checkbox"/> kontrolní snímek rtg:	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			

6. Kontrolní provoz (s prázdnou komorou)

zjištěna odchylka od specifikace programu:	<input checked="" type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> ano	jaká:
zjištěno nežádoucí elektromagnetické rušení:	<input checked="" type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> ano	zdroj:
zjištěn nežádoucí únik provozního prostředku:	<input checked="" type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> ano	kterého:
zjištěno nežádoucí kolísání kvality provozního prostředku:	<input checked="" type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> ano	kterého:
zjištěna jiná závada:	<input checked="" type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> ano	jaká:

7. Poznámky a doplnění

8. Závěr: Kontrola prokázala - neprokázala správnou instalaci a shodu s požadovanými specifikacemi výrobce.

1. Instalovaný přístroj

Druh: *ultrazvuková myčka*
Typ: *ULTRAMATIC 550 ANLAGE*
Výrobní číslo: *281040072, 095004072*
Výrobce:

2. Provozovatel

Obchodní jméno: *Fakultní nemocnice Olomouc*
Adresa: *Pavlova 6 Olomouc*
IČO: *00098892* DIČ: *379-00098892*
Umístění přístroje: *centrální sterilizace*

3. Dodaná dokumentace a doklady

- Návod k použití a údržbě *dx*
 Technický popis rentgenu
 Revizní kniha tlakové nádoby sterilizátoru
 Revizní kniha tlakové nádoby vyvíječe páry
 Prohlášení o shodě nebo ujištění, že bylo vydáno
 Prohlášení, že přístroj vyhověl výstupní kontrole

4. Okolí, provozní prostředky a odpad

- okolí:
- | | | |
|-------------------------|-------------|--------|
| teplota | <i>22</i> | °C |
| rel. vlhkost | <i>39,2</i> | % |
| tlak | <i>1000</i> | mbar |
| el. rozvod: napětí | <i>234</i> | V |
| pára - ext. zdroj: tlak | | bar |
| tlakový vzduch: tlak | | bar |
| chladičí voda: tlak | | bar |
| | | °C |
| | | mmol/l |
| napájecí voda: tlak | | bar |
| (pro vyvíječ) vodivost | | µS/cm |
- odpad:
- vyhovuje specifikaci: poznámka:
 ano ne
 ano ne
 ano ne
 ano ne
 ano ne
 ano ne
 ano ne
 ano ne
 ano ne
 ano ne
 ano ne
- rozvod páry: vyhovuje, nevyhovuje
způsob úpravy:

5. Bezpečnostní systémy a testovací programy

- připojení ochranného vodiče: vyhovuje specifikaci
 průchodnost pojistných ventilů: ano ne
 bezpečnostní lišty dveří (jsou-li ve výbavě): ano ne
 vakuový test (výsledek): ano ne
 Bowie-Dick test (výsledek): ano ne
 kontrolní snímek rtg: ano ne
- odpor ochr. vodiče: *9049* Ω
unikající proud: *0,01* mA

6. Kontrolní provoz (s prázdnou komorou)

- zjištěna odchylka od specifikace programu: ne ano jaká:
zjištěno nežádoucí elektromagnetické rušení: ne ano zdroj:
zjištěn nežádoucí únik provozního prostředku: ne ano kterého:
zjištěno nežádoucí kolísání kvality provozního prostředku: ne ano kterého:
zjištěna jiná závada: ne ano jaká:

7. Poznámky a doplnění

8. Závěr: Kontrola prokázala - neprokázala správnou instalaci a shodu s požadovanými specifikacemi výrobce.